


Masážny prístroj na krk G7Pro-Fold

SKG

Masážní přístroj
G7Pro-Fold

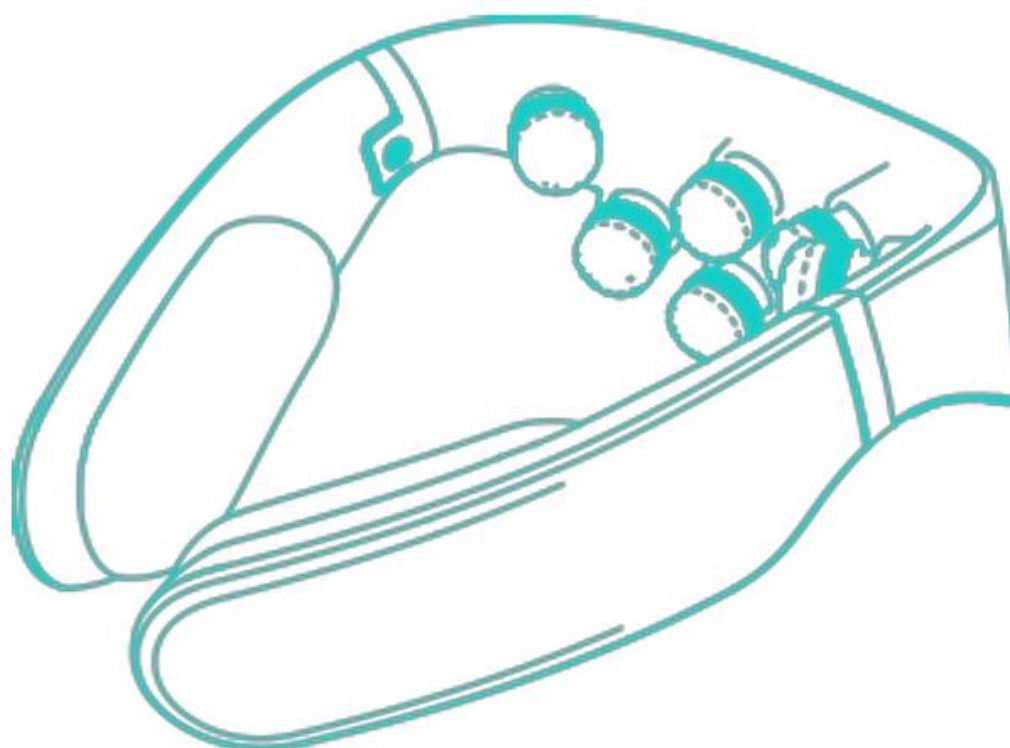

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Nepoužívajte s implantovanými zdravotníckymi zariadeniami (kardiostimulátor, umelé srdce/plúca, EKG prístroje).
- Nevhodné pre tehotné ženy, osoby nad 70 rokov (osoby nad 65 rokov iba na nízkom nastavení) a osoby s vážnymi zdravotnými problémami (napr. poruchy zrážanlivosti, nádory, zápaly, srdcové ochorenia, kovové implantáty).
- Nepoužívajte pri šoférovaní, lezení alebo iných rizikových činnostiach.
- Vyhnite sa používaniu v blízkosti srdca, hlavy, úst, genitálií, na poškodenú kožu alebo na obe chodidlá súčasne.
- Nepoužívajte v horľavých alebo výbušných priestoroch.
- Horúci obklad maximálne 15 minút, nikdy počas spánku.
- V prípade akéhokoľvek nepohodlia prestaňte výrobok používať.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Pred použitím navlhčite pokožku na krku a priložte prístroj priamo na pokožku.
2. Zapnite dlhým stlačením tlačidla napájania; krátkym stlačením meníte režimy.
3. Intenzitu zvyšujte postupne podľa pocitu.
4. Neprekračujte odporúčanú dobu masáže; v prípade nepohodlia ihneď prerušte.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- Uchovávajte mimo dosahu detí a osôb v bezvedomí.
- Chráňte pred priamym slnkom, vysokou teplotou, vlhkosťou, prachom a vibráciami.
- Čistite mäkkou, mierne vlhkou handričkou.
- Ak prístroj nepoužívate, nabíjajte ho aspoň raz za mesiac.

POKYNY PRE BATÉRIU

- Pred likvidáciou vyberte Li-ion batériu a odovzdajte ju na recykláciu.
- Nevystavujte teplu, ohňu, neprepichujte, nerozoberajte, nezamykajte.

- Uchovávajte mimo dosahu detí; v prípade kontaktu s elektrolytom vyhľadajte lekára.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Nespustí sa → Nabite zariadenie, skontrolujte, či je zapnuté.
- Nenabíja sa → Skontrolujte správne pripojenie kábla USB-C a funkčnosť zásuvky.

ODPORÚČANIA

- Používajte iba podľa návodu, nie na iné účely.
- Nepoužívajte súčasne s inými zdravotníckymi zariadeniami.
- Pri prvom použití alebo po dlhšom skladovaní zariadenie úplne nabite.