


Masážny prístroj na krk a ramená SKG HS500-2

**SKG**

**Neck & Shoulder Massager  
HS500-2**

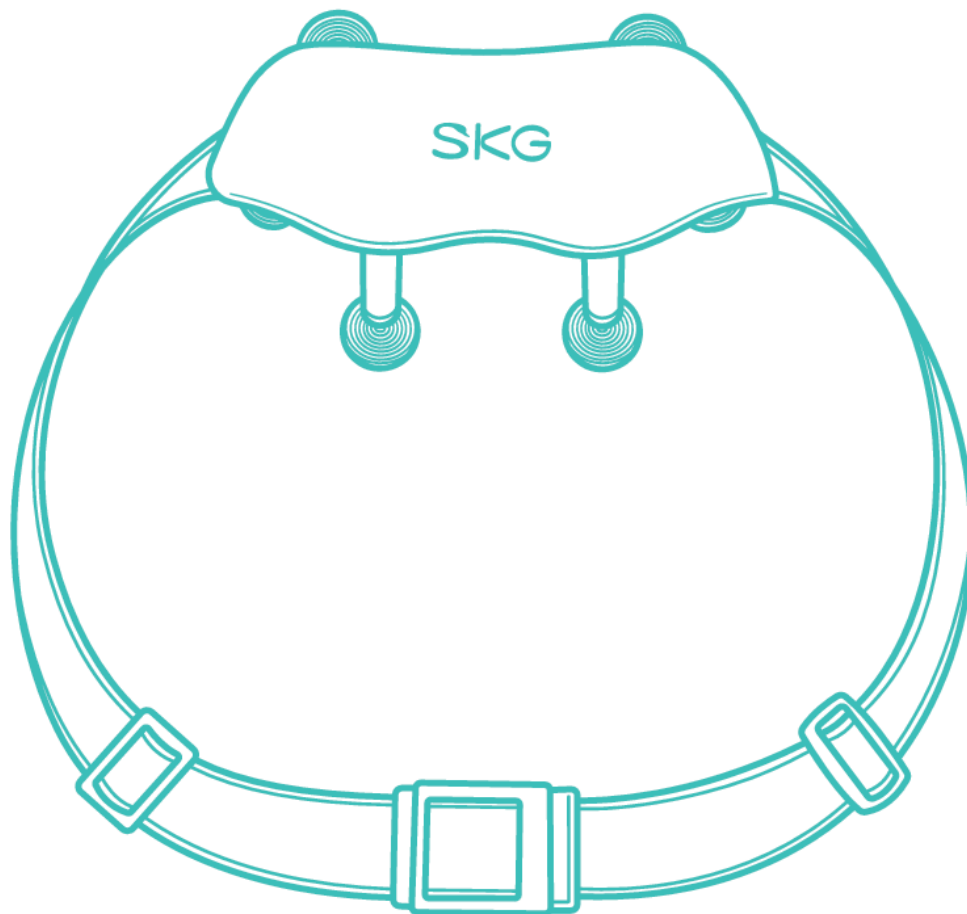

USER MANUAL

## Bezpečnostné upozornenia

- Používajte výhradne podľa určenia na oblasť krku a ramien.
- Nevhodné pre osoby s kardiostimulátorom alebo vážnymi zdravotnými problémami.
- Nepoužívajte pri šoférovaní ani počas spánku.
- Nepoužívajte na poranenú alebo opuchnutú pokožku.
- Nepoužívajte vo vlhkom prostredí ani vo vode.
- V prípade bolesti alebo nepríjemných pocitov prestaňte výrobok používať.

## Batéria

- Obsahuje dobíjateľnú lítium-iónovú batériu.
- Nabíjajte pomocou USB kábla (5 V).
- Nevystavujte vysokým teplotám ani ohňu.
- Batériu nerozoberajte ani nepoškodzujte.
- Likvidujte ekologicky v zbernom mieste.

## Použitie

- Nasad'te si zariadenie okolo krku a nastavte popruhy.
- Zapnutie/vypnutie: podržte tlačidlo.
- Prepínanie režimov: krátkym stlačením tlačidla.
- Pre intenzívnejšiu masáž použite ručné potiahnutie popruhov.
- Po použití prístroj vypnite a zložte.

## Režimy

- Masážne hlavice s rotáciou
- Vyhrievanie (hot compress)
- Viac úrovní intenzity masáže

## Údržba

- Čistite mäkkou, jemne navlhčenou handričkou.
- Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky.
- Neponárajte do vody.
- Skladujte na suchom mieste.
- Odporúčané použitie: max. 30 minút denne.

## Vyhlásenie

- Zariadenie spĺňa príslušné európske normy a smernice.
- Určené na bežné použitie na tele.