


## SKG Masážny prístroj na chrbát TS700

**SKG**

**Back Massager  
TS700**

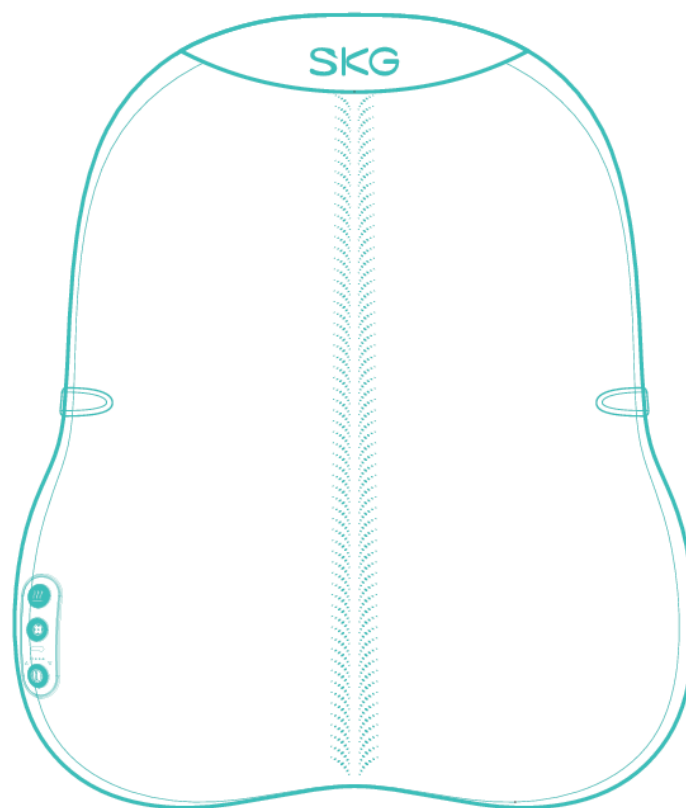

**USER MANUAL**

## Bezpečnostné upozornenia

- Používajte iba na oblasť chrbta.
- Nevhodné pre osoby s kardiostimulátorom alebo inými implantovanými zariadeniami.
- Nepoužívajte pri šoférovaní ani počas spánku.
- Nepoužívajte na poranenú alebo zapálenú pokožku.
- Nepoužívajte vo vlhkom prostredí ani vo vode.
- Dlhodobé používanie môže spôsobiť prehriatie – nepoužívajte príliš dlho na jednom mieste.
- V prípade nepríjemných pocitov ihneď prestaňte používať.

## Batéria

- Obsahuje dobíjateľnú lítium-iónovú batériu.
- Nabíjajte pomocou USB kábla (5 V).
- Nevystavujte vysokým teplotám ani ohňu.
- Batériu nerozoberajte ani nepoškodzujte.
- Likvidujte ekologicky v zbernom mieste.

## Použitie

- Umístite prístroj na operadlo stoličky alebo sedadla.
- Zapnutie/vypnutie: podržte tlačidlo napájania.
- Prepínanie režimov: krátkym stlačením tlačidla (horná časť chrbta, dolná časť chrbta, celý chrbát).
- Zapnite bodovú masáž pomocou tlačidla Spot.
- Zapnite vyhrievanie tlačidlom Hot Compress a nastavte intenzitu.
- Automatické vypnutie po cca 15 minútach.

## Režimy

- Horná časť chrbta
- Dolná časť chrbta
- Celý chrbát
- Bodová masáž (Spot)
- Vyhrievanie – 3 úrovne (cca 45–55 °C)

## Údržba

- Čistite mäkkou handričkou, prípadne mierne navlhčenou.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte do vody.
- Skladujte na suchom mieste.

- Odporúčané použitie: max. 30 minút denne.

### **Vyhlásenie**

- Zariadenie spĺňa príslušné európske normy a smernice.
- Určené na bežné použitie na tele.