


SKG Masážní pistole F1 Pro

SKG

Body Massager
F1 Pro

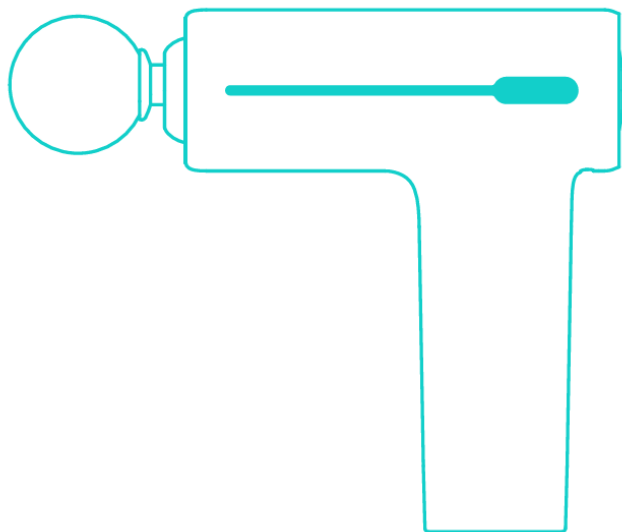

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte u osob s rakovinou, osteoporózou, žilní trombózou, srdečními chorobami, vysokým tlakem, akutním zánětem nebo s implantovanými elektronickými zařízeními (např. kardiostimulátor).
- Nepoužívejte během těhotenství v blízkosti břicha, při hladovění, plném žaludku nebo pod vlivem alkoholu.
- Nemasírujte páteř, česku, holenní kost, obličejové svaly ani jiné kostní části přímo.
- Nepřekračujte 4–5 minut masáže stejného místa, celková doba max. 15 min na cyklus (30 min denně).
- Nevkládejte prsty ani jiné části těla do otvoru pro hlavici.
- Nepoužívejte při nabíjení, nevystavujte vodě, otevřenému ohni, vysokým teplotám ani přímému slunci.
- Nevystavujte nárazům, neprovádějte úpravy bez povolení.

POKYNY PRO BATERII A LIKVIDACI

- Zařízení obsahuje Li-ion baterii – před likvidací ji vyjměte a odevzdejte do sběrného místa.
- Baterii nevhazujte do ohně, nepropichujte, nerozebírejte, nezkratujte ani neskladujte s kovovými předměty.
- Uchovávejte mimo dosah dětí, při spolknutí nebo kontaktu s elektrolytem ihned vyhledejte lékaře.

POKYNY K POUŽITÍ

1. Nainstalujte vhodnou hlavici (kulová, plochá, U-tvar, kulka).
2. Zapněte dlouhým stiskem (1,5 s). Krátkým stiskem měníte úroveň intenzity (1–6).
3. Doporučeno začít na nízké intenzitě a pomalu pohybovat po svalu.
4. Na bolestivá místa použijte přiměřený tlak max. 30 s, na stejné místo max. 60 s.
5. Automatické vypnutí po 15 minutách.

ÚDRŽBA

- Čistěte měkkým hadříkem s alkoholem nebo vlhkým ubrouskem.
- Skladujte v suchu, chraňte před prachem, vodou a vibracemi.
- Při dlouhodobém nepoužívání nabijte jednou za měsíc (nad 20 % kapacity).

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Nespouští se → zkontrolujte nabití, dlouze podržte tlačítko.
- Nenabíjí se → ověřte připojení kabelu USB-C a funkčnost zásuvky.