


SKG Mini masážní přístroj F3

SKG

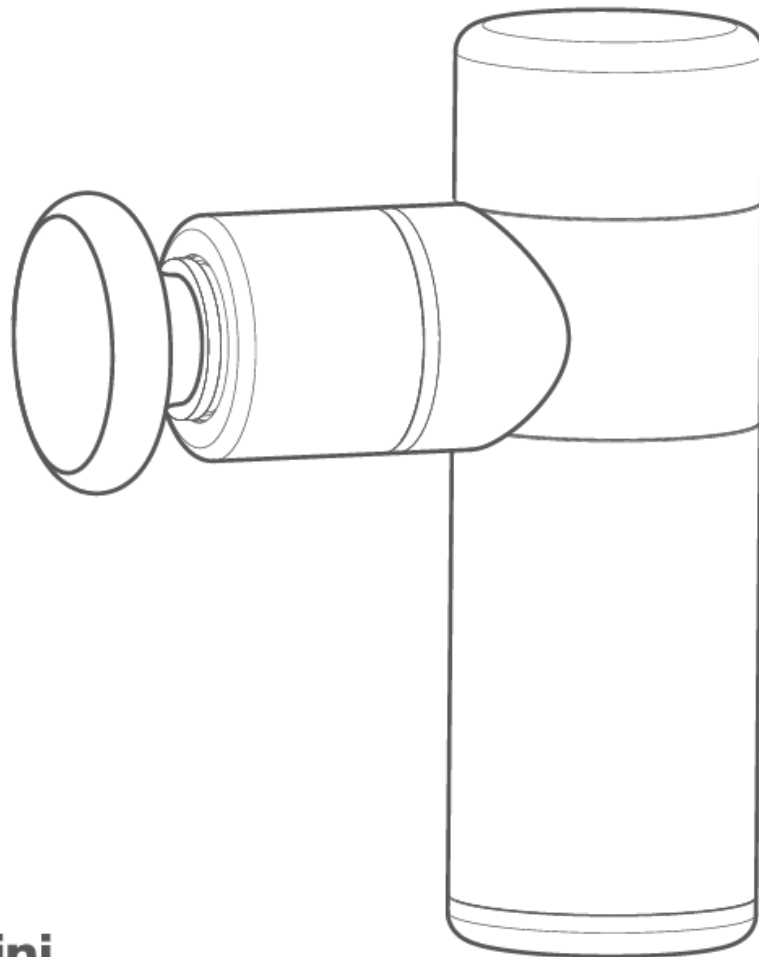

Mini Body Massager

Directions for use

Bezpečnostní upozornění

- Používejte pouze dle určení na svaly těla.
- Nevhodné pro děti bez dozoru.
- Nepoužívejte na poraněnou nebo oteklou pokožku.
- Nepoužívejte při zdravotních potížích bez konzultace s lékařem.
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí ani ve vodě.
- V případě bolesti nebo nepříjemných pocitů přestaňte používat.

Baterie

- Obsahuje dobíjecí lithium-iontovou baterii.
- Nabíjejte pomocí přiloženého kabelu.
- Nevystavujte vysokým teplotám ani ohni.
- Baterii nerozebírejte ani nepoškozujte.
- Likvidujte ekologicky ve sběrném místě.

Použití

- Nasad'te požadovaný masážní nástavec.
- Zapněte zařízení podržením tlačítka.
- Zvolte intenzitu krátkým stiskem tlačítka.
- Používejte na požadovanou svalovou oblast.
- Po použití zařízení vypněte.

Režimy

- Různé úrovně intenzity vibrací pro masáž svalů
- Vhodné pro relaxaci, regeneraci a uvolnění svalů

Údržba

- Čistěte suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem.
- Nepoužívejte chemické čisticí prostředky.
- Uchovávejte na suchém místě.
- Pravidelně kontrolujte nástavce a zařízení.

Prohlášení

- Zařízení splňuje příslušné evropské normy a směrnice.
- Určeno pro běžné použití na těle.