


Masážny prístroj na pás VS500

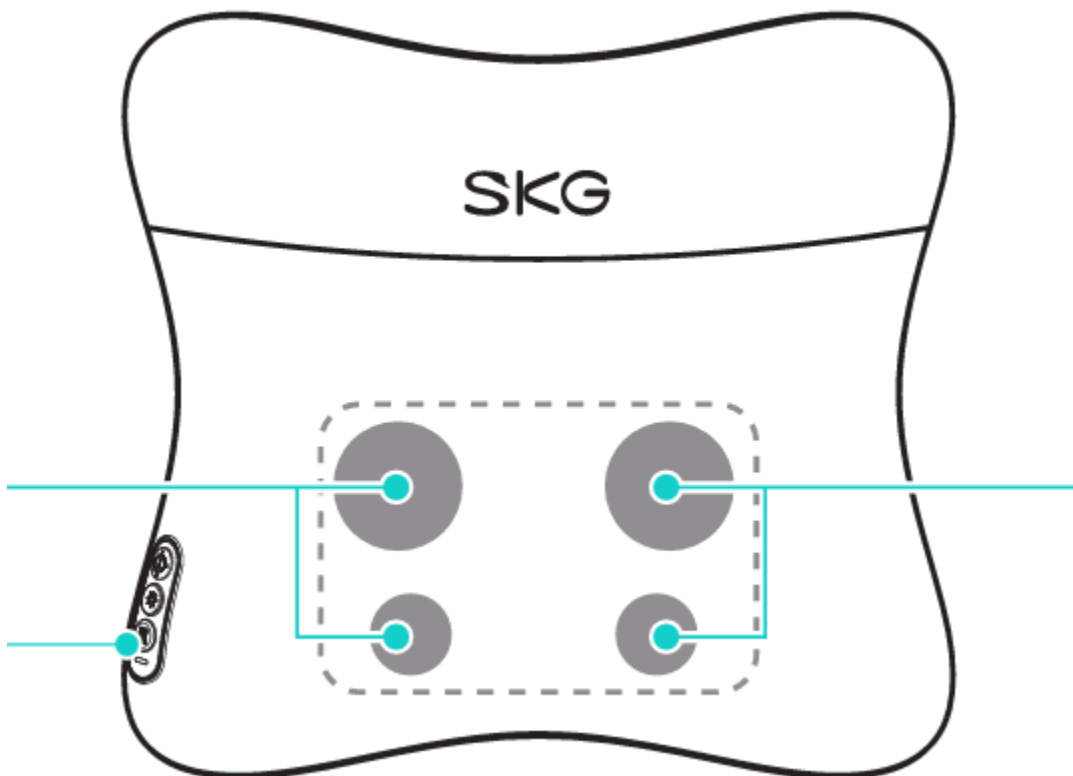

1. ZÁKLADNÉ PARAMETRE

- Model: VS500
- Kapacita batérie: 3200 mAh / 23,68 Wh
- Vstup: 5 V, max. 15 W
- Funkcie: masáž, teplý obklad (predná a zadná strana)
- Nabíjanie: USB-C

2. OVLÁDANIE

- Zapnutie/Vypnutie: Podržte tlačidlo napájania 3 s.
- Zmena režimu masáže: Krátko stlačte tlačidlo napájania.
- Teplý obklad predná strana: Krátko stlačte tlačidlo „Hot Compress“ vpredu.
- Horúci obklad na zadnej strane: Krátko stlačte tlačidlo na zadnej strane, ďalším stlačením meníte intenzitu, tretím stlačením vypnete.
- Ukončenie masáže: Podržte tlačidlo napájania 3 s.

3. INDIKÁCIA STAVU

- Zelené svetlo: batéria je plne nabitá.
- Oranžové blikanie: batéria je takmer vybitá.
- Oranžové „pulzujúce“ svetlo: nabíjanie.
- Zelené „pulzujúce“ svetlo: nabité.

4. NABÍJANIE

- Používajte iba nabíjačky s výkonom do 15 W.
- Nenabíjajte s mokrými rukami.
- Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, nabite ho aspoň raz za mesiac na >20 % kapacity.

5. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Nepoužívajte:

- S kardiostimulátorom, umelým srdcom/plúcami, EKG prístrojom.
- Počas tehotenstva alebo po pôrode bez súhlasu lekára.
- Na rany, jazvy, miesta s nádormi, kovovými implantátmi, zápalmi.
- U osôb s poruchami zrážanlivosti krvi, po mozgovej príhode v spastickej fáze, s ťažkými kognitívnymi poruchami, u dojčiat a detí bez vedomia.

Konzultujte s lekárom:

- Horúčka >38 °C, infekcie, vysoký/nízky tlak, srdcové alebo neurologické problémy, osteoporóza, zlomeniny chrbtice.

V prípade nevoľnosti ihneď prestaňte používať.

6. ÚDRŽBA A LIKVIDÁCIA

- Batériu recyklujte u špecializovanej firmy.
- Pred vyberaním batérie zariadenie vypnite.
- Postup: otvorte zips, uvoľnite skrutky, odpojte vodiče, vyberte jednotku a batériu.
- Batériu neprehrievajte, neprepichujte a nerozoberajte.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.

7. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

- Pre osoby staršie ako 16 rokov.
- Spĺňa smernicu (EÚ) 2023/988.
- Výrobca: SKG Health Technology Co., Ltd.