


Masážní přístroj na krk G7Pro-Fold

SKG

Masážní přístroj
G7Pro-Fold

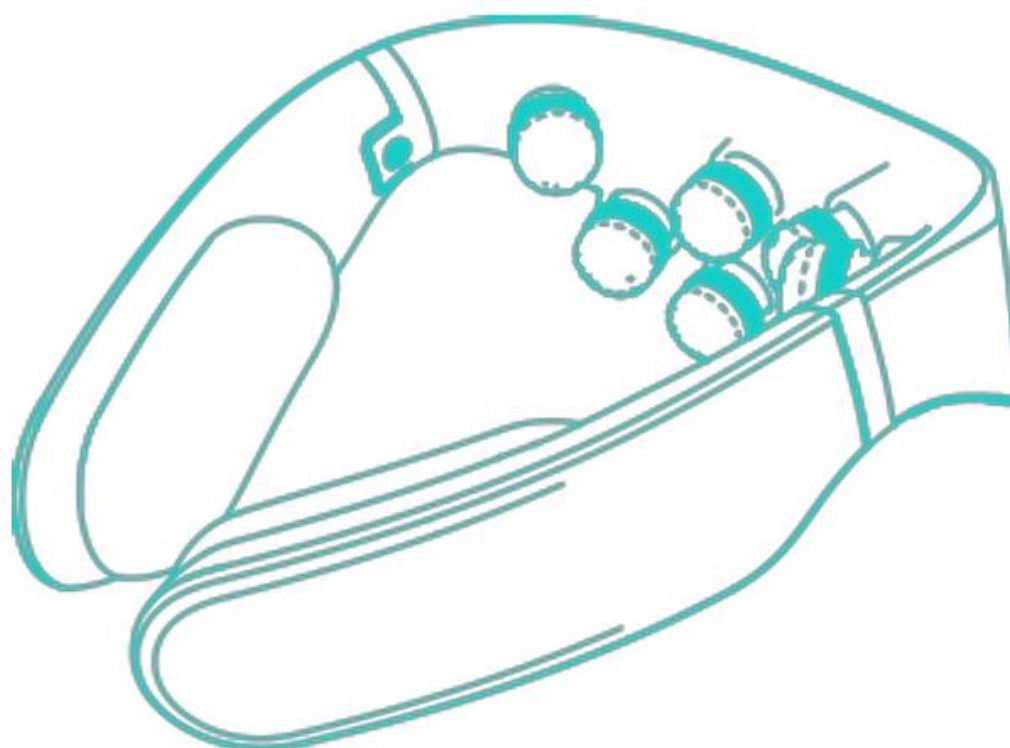

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte s implantovanými lékařskými zařízeními (kardiostimulátor, umělé srdce/plíce, EKG přístroje).
- Nevhodné pro těhotné ženy, osoby po 70. roce (nad 65 let pouze na nízké nastavení) a osoby s vážnými zdravotními problémy (např. poruchy srážlivosti, nádory, záněty, srdeční onemocnění, kovové implantáty).
- Nepoužívejte při řízení, lezení nebo jiných rizikových činnostech.
- Vyhněte se použití v blízkosti srdce, hlavy, úst, genitálií, na poškozené kůži nebo obou chodidel současně.
- Nepoužívejte v hořlavých nebo výbušných prostorech.
- Horký obklad max. 15 minut, nikdy během spánku.
- Přestaňte používat při jakémkoliv diskomfortu.

POKYNY K POUŽITÍ

1. Před použitím navlhčete pokožku na krku a nasad'te přístroj přímo na kůži.
2. Zapněte dlouhým stiskem tlačítka napájení; krátkým stiskem měníte režimy.
3. Intenzitu zvyšujte postupně podle pocitu.
4. Nepřekračujte doporučenou dobu masáže; při diskomfortu ihned přeruš'te.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Uchovávejte mimo dosah dětí a osob v bezvědomí.
- Chraňte před přímým sluncem, vysokou teplotou, vlhkostí, prachem a vibracemi.
- Čistěte měkkým, mírně vlhkým hadříkem.
- Pokud přístroj nepoužíváte, nabijte alespoň jednou měsíčně.

POKYNY PRO BATERII

- Před likvidací vyjměte Li-ion baterii a odevzdejte ji k recyklaci.
- Nevystavujte teplu, ohni, nepropichujte, nerozebírejte, nezkratujte.

- Uchovávejte mimo dosah dětí; při kontaktu s elektrolytem vyhledejte lékaře.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Nespouští se → Nabijte přístroj, zkontrolujte zapnutí.
- Nenabíjí se → Ověřte správné připojení kabelu USB-C a funkčnost zásuvky.

DOPORUČENÍ

- Používejte pouze podle návodu, ne k jiným účelům.
- Nepoužívejte s jinými zdravotnickými přístroji současně.
- Při prvním použití nebo po dlouhém skladování přístroj plně nabijte.