


## Masážna pištoľ SKG F1 Pro

SKG

Body Massager  
F1 Pro

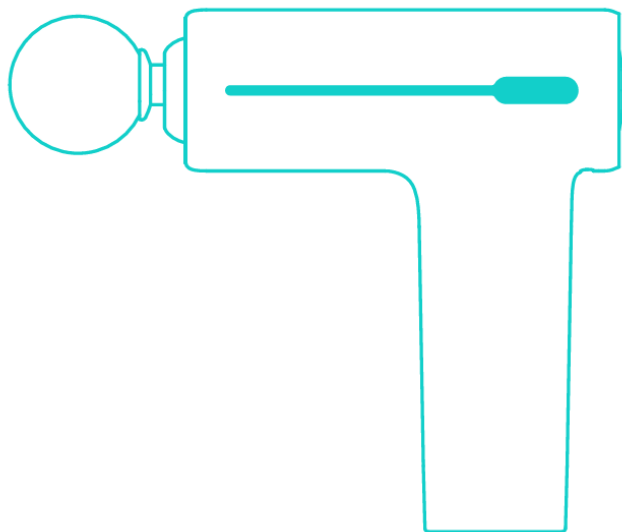

### BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Nepoužívajte u osôb s rakovinou, osteoporózou, žilovou trombózou, srdcovými ochoreniami, vysokým tlakom, akútnym zápalom alebo s implantovanými elektronickými zariadeniami (napr. kardiostimulátorom).
- Nepoužívajte počas tehotenstva v blízkosti brucha, pri hladovaní, s plným žalúdkom alebo pod vplyvom alkoholu.
- Nemasírujte priamo chrbticu, kolennú kosť, holenú kosť, tvárové svaly ani iné kostné časti.
- Neprekračujte 4–5 minút masáže na jednom mieste, celková dĺžka je max. 15 minút na cyklus (30 minút denne).
- Nevkladajte prsty ani iné časti tela do otvoru pre hlavicu.
- Nepoužívajte počas nabíjania, nevystavujte vode, otvorenému ohňu, vysokým teplotám ani priamemu slnku.
- Nevystavujte nárazom, nevykonávajte úpravy bez povolenia.

## POKYNY PRE BATÉRIU A LIKVIDÁCIU

- Zariadenie obsahuje Li-ion batériu – pred likvidáciou ju vyberte a odovzdajte do zberného miesta.
- Batériu nevhadzujte do ohňa, neprepichujte, nerozoberajte, nezkratujte ani neskladujte s kovovými predmetmi.
- Uchovávajte mimo dosahu detí, v prípade požitia alebo kontaktu s elektrolytom okamžite vyhľadajte lekára.

## NÁVOD NA POUŽITIE

1. Nasad'te vhodnú hlavicu (gul'atú, plochú, v tvare U, gul'ôčku).
2. Zapnite dlhým stlačením (1,5 s). Krátkym stlačením meníte úroveň intenzity (1–6).
3. Odporúča sa začať s nízkou intenzitou a pomaly pohybovať po svale.
4. Na bolestivé miesta vyvíjajte primeraný tlak max. 30 s, na rovnaké miesto max. 60 s.
5. Automatické vypnutie po 15 minútach.

## ÚDRŽBA

- Čistite mäkkou handričkou s alkoholom alebo vlhkou utierkou.
- Skladujte na suchom mieste, chráňte pred prachom, vodou a vibráciami.
- Pri dlhodobom nepoužívaní nabíjajte raz za mesiac (nad 20 % kapacity).

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Nespustí sa → skontrolujte nabitie, podržte tlačidlo dlhšie.
- Nenabíja sa → skontrolujte pripojenie kábla USB-C a funkčnosť zásuvky.