


Masážny prístroj na krk a ramená H5 Mini

SKG

Neck & Shoulder Massager
H5Mini

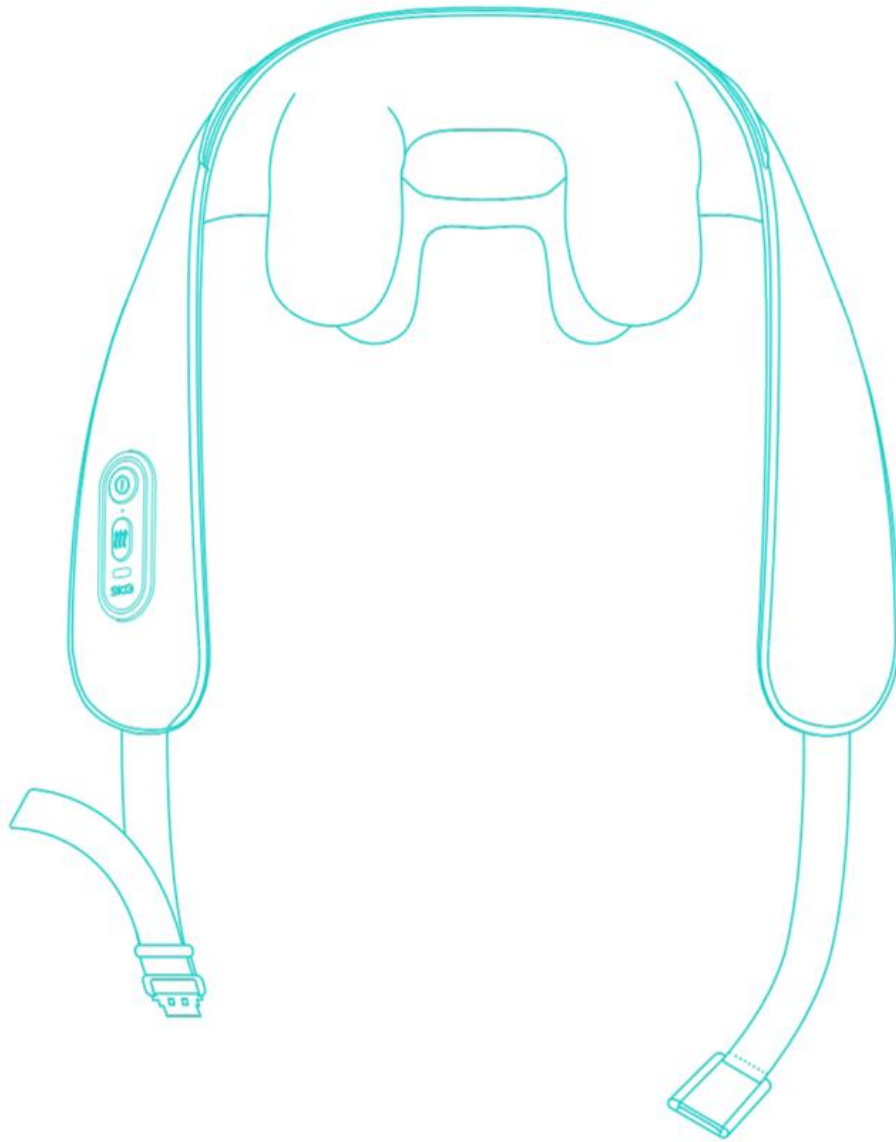

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Nepoužívajte s implantovanými zdravotníckymi zariadeniami (kardiostimulátor, prístroje na umelé dýchanie, EKG).
- Nevhodné pre tehotné a dojčiace ženy, deti, osoby nad 70 rokov (nad 65 rokov iba na nízkom nastavení), osoby s vážnymi zdravotnými problémami (nádory, zápaly, poruchy zrážanlivosti, kovové implantáty).
- Nepoužívajte v blízkosti srdca, na kovových implantátoch, na poškodenej koži ani v oblastiach so zápalom, opuchom alebo infekciou.
- Nepoužívajte pri šoférovaní, lezení ani pri iných nebezpečných činnostiach.
- Vyhnite sa používaniu v horľavom alebo výbušnom prostredí.
- Nepoužívajte počas spánku alebo v stave zníženého vedomia.
- Maximálna doba používania: 20 minút (2 cykly) na prevenciu prehriatia a podráždenia.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Umiestnite prístroj okolo krku podľa návodu a zapnite ho dlhým stlačením tlačidla.
2. Krátkym stlačením prepínajte režimy, intenzitu zvyšujte postupne.
3. Horúci obklad používajte maximálne 15 minút, vždy kontrolujte teplotu.
4. Ak pocítite nepríjemné pocity, okamžite prerušte používanie.

POKYNY PRE BATÉRIU

- Prístroj obsahuje Li-ion batériu, ktorú pred likvidáciou vyberte a odovzdajte na recykláciu.
- Nevystavujte batériu teplu, ohňu, nárazom ani vlhkosti.
- Neprikladajte, nerozoberajte a nezamykajte póly batérie.
- Uchovávajte mimo dosahu detí; v prípade úniku elektrolytu vyhľadajte lekára.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- Čistite mäkkou, mierne vlhkou handričkou.
- Skladujte na suchom mieste, mimo dosahu priameho slnka, vlhkosti, prachu a zdrojov tepla.

- Nenechávajte v prostredí s extrémnymi teplotami ani v blízkosti otvoreného ohňa.
- Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, nabite ho aspoň raz za mesiac.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Nespustí sa → skontrolujte nabitie a správne zapnutie.
- Nenabíja sa → skontrolujte kábel USB-C, zásuvku a správne zapojenie.

ODPORÚČANIA

- Používajte iba podľa návodu a na určený účel.
- Nepoužívajte súčasne s inými zdravotníckymi zariadeniami.
- Pred prvým použitím alebo po dlhšom skladovaní zariadenie úplne nabite.