


SKG Masážní přístroj na záda TS700

SKG

**Back Massager
TS700**

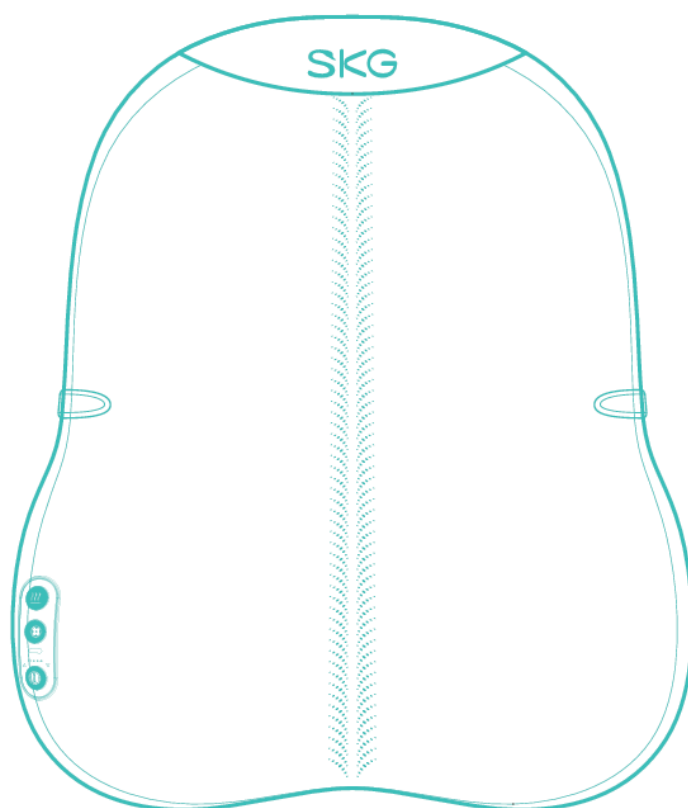

USER MANUAL

Bezpečnostní upozornění

- Používejte pouze na oblast zad.
- Nevhodné pro osoby s kardiostimulátorem nebo jinými implantovanými zařízeními.
- Nepoužívejte při řízení ani během spánku.
- Nepoužívejte na poraněnou nebo zanícenou pokožku.
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí ani ve vodě.
- Dlouhodobé použití může způsobit přehřátí – nepoužívejte příliš dlouho na jednom místě.
- V případě nepříjemných pocitů okamžitě přestaňte používat.

Baterie

- Obsahuje dobíjecí lithium-iontovou baterii.
- Nabíjejte pomocí USB kabelu (5 V).
- Nevystavujte vysokým teplotám ani ohni.
- Baterii nerozebírejte ani nepoškozujte.
- Likvidujte ekologicky ve sběrném místě.

Použití

- Umístěte přístroj na opěradlo židle nebo sedačky.
- Zapnutí/vypnutí: podržte tlačítko napájení.
- Přepínání režimů: krátkým stiskem tlačítka (horní záda, dolní záda, celá záda).
- Zapněte bodovou masáž pomocí tlačítka Spot.
- Zapněte vyhřívání tlačítkem Hot Compress a nastavte intenzitu.
- Automatické vypnutí po cca 15 minutách.

Režimy

- Horní záda
- Dolní záda
- Celá záda
- Bodová masáž (Spot)
- Vyhřívání – 3 úrovně (cca 45–55 °C)

Údržba

- Čistěte měkkým hadříkem, případně lehce navlhčeným.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Neponořujte do vody.
- Skladujte na suchém místě.
- Doporučené použití: max. 30 minut denně.

Prohlášení

- Zařízení splňuje příslušné evropské normy a směrnice.
- Určeno pro běžné použití na těle.