


Oblast s červeným světlem

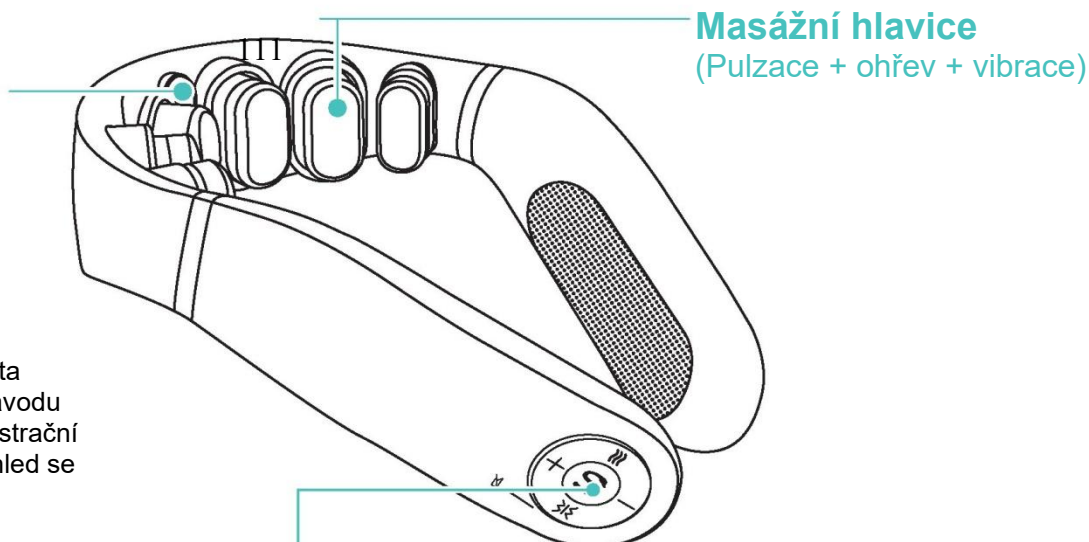


* Snímky a schémata uvedené v tomto návodu slouží pouze pro ilustrační účely. Skutečný vzhled se může lišit.

Horký obklad Krátké stisknutí

Změňte nastavení teploty

Zvýšení frekvence

Kontrolka

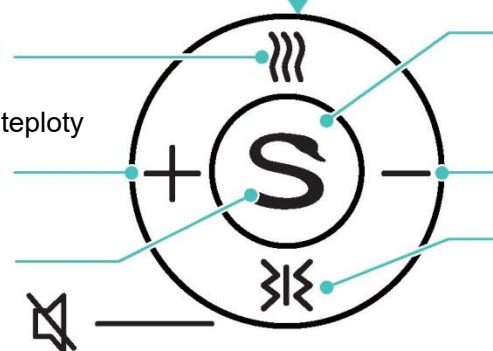

Zapnuto/Vypnuto/Režim

Snížení frekvence


Přepínač vibrací / tichého režimu

Krátké stisknutí Přepínač vibračního stupně

Dlouhé stisknutí Zapnutí/vypnutí hlasu


Pokyny k nošení

- * Noste těsně na těle
- * Před použitím pokožku navlhčete vlhčeným ubrouskem

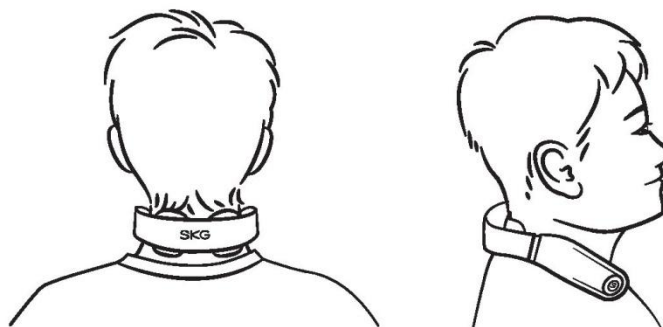

Aplikace Future Wear

1. Stáhněte si aplikaci „Future Wear“ z obchodu s aplikacemi nebo naskenujte QR kód.

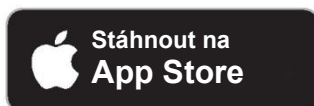

Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.



2. Zaregistrujte se a přihlaste se do aplikace.



3. Zapněte zařízení a aktivujte Bluetooth v mobilním telefonu, poté zařízení přidejte do aplikace „Future Wear“.

Pokyny k nastavení intenzity pulzů: Výchozí nastavení produktu je standardní intenzita masáže, která vyhovuje potřebám většiny uživatelů. Pokud dáváte přednost intenzivnější pulzní masáži, můžete ji nastavit na „Silnou intenzitu masáže“ kliknutím na ikonu „...“ v pravém horním rohu stránky pro ovládání zařízení v aplikaci.

Zobrazení stavu baterie

CZ

Barva kontrolky	Stav kontrolky	Popis
Modré světlo	Svíí	Úroveň nabití baterie $\geq 25\%$
Oranžové světlo	Svíí	Úroveň nabití baterie $< 25\%$
Oranžové světlo	Pulzuje	Nabíjení
Modré světlo	Pulzuje	Baterie je plně nabitá

Údržba

CZ

- Vyhněte se přímému slunečnímu záření.
- Vyhněte se vysokým teplotám a vlhkosti.
- Nevystavujte produkt otevřenému ohni.
- Chraňte před tvrdými předměty a zabraňte nárazům a poškrábání.
- Produkt otřete mírně navlhčeným nebo měkkým hadříkem.
- Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, nabijte jej jednou za měsíc a při používání udržujte baterii plně nabitou.

Technické údaje

CZ



Název produktu	Přístroj na masáž krku		
Model	GS500-N	Jmenovité vstupní napětí	5 V _{DC}
Kapacita baterie	1800 mAh/6,66 Wh	Jmenovitý příkon	10 W

Pokud produkt nefunguje správně, zkontrolujte prosím následující body. Pokud naše doporučení problém nevyřeší, vraťte prosím produkt prodejci k opravě.

Stav	Možná příčina	Řešení
Nelze spustit	Vybitá baterie	Nabijte produkt
	Produkt není zapnutý.	Zapněte zařízení dlouhým stisknutím tlačítka napájení
	Zařízení je stále připojeno k domácí elektrické zásuvce	Odpojte nabíjecí kabel od zařízení.
Nelze nabíjet nebo se nezobrazuje kontrolka nabíjení	Nabíjecí kabel není správně zasunut do zásuvky	Znovu připojte nabíjecí kabel.
	Použit nesprávný nabíjecí kabel	Použijte kabel s konektorem typu C.

Zlikvidujte s opatrností

Prosíme, podporujte recyklaci dobíjecích baterií (lithium-iontových baterií)

 Nebezpečí	<p>Baterie tohoto produktu je speciální dobíjecí baterie, kterou nelze používat v jiných zařízeních. Jakmile baterii vyjmete, nenabíjejte ji.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nevhazujte do ohně ani nevystavujte nadměrnému teplu. • Nepropichujte hřebíky, nevystavujte silným nárazům a nerozebírejte • Nepřipojujte kladný a záporný pól baterie přímo ke kovovému předmětu • Neskladujte jej společně s náhrdelníky, sponkami do vlasů atd. • Nenabíjejte, nepoužívejte ani neskladujte na místech s vysokými teplotami, jako je okolí sporáku nebo na přímém slunci • Všechny výše uvedené situace mohou vést k přehřátí, požáru nebo prasknutí.
 Varování	<p>Vyjmutou dobíjecí baterii uložte mimo dosah malých dětí, aby nedošlo k jejímu náhodnému spolknutí</p> <ul style="list-style-type: none"> • V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. • Pokud dojde k úniku kapaliny z baterie, nedotýkejte se jí holýma rukama. • Dodržujte následující bezpečnostní pokyny: • Pokud se kapalina z baterie dostane do očí, hrozí nebezpečí oslepnutí. Nedotýkejte se očí rukama. Okamžitě je vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se kapalina z baterie dostane na tělo nebo na oděv, může způsobit zánět kůže nebo poranění. Opláchněte čistou vodou a pokud

- | | |
|--|--|
| | <p>ne příjemné pocity přetrvávají, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.</p> <ul style="list-style-type: none">• Demontáž je povolena pouze v případě likvidace produktu. Nedodržení těchto pokynů může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění nebo jiným nehodám. V případě opravy (s výjimkou výměny baterie) se prosím obraťte na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. |
|--|--|

Lithium-iontová baterie použitá v tomto produktu je cenným recyklovatelným materiálem. Před likvidací zařízení prosím vyjměte lithium-iontovou baterii a odevzdejte ji odborné organizaci, která se zabývá recyklací a zpracováním dobíjecích baterií.

- Před likvidací přístroje je nutné z něj vyjmout baterii.
- Před vyjmutím baterie je nutné zařízení vypnout.
- Baterii je třeba bezpečně zlikvidovat.

Postup odstranění:

1. Otevřete skořápku pomocí nástroje.
2. Odšroubujte šrouby na desce s plošnými spoji.
3. Odpojte konektor baterie.
4. Vyjměte baterii.

Upozornění a bezpečnostní pokyny

CZ



Varování

- Tento produkt je určen k masážím v rámci osobní péče a nelze jej používat jako náhradu za léky nebo zdravotnické prostředky.
- Tento produkt nesmí používat děti, těhotné ženy a ženy v období menstruace.
- Obsahuje lithiovou baterii. Nevystavujte jej vysokým teplotám.
- Tento produkt používejte pod dohledem lékaře, pokud máte citlivou pokožku, alergickou dermatitidu v obličeji nebo pokud máte v obličeji oblasti s kosmetickými přípravky.
- Uživatelé s alergií na kovy nebo teplo musí dodržovat bezpečnostní opatření.
- Tento produkt je vybaven funkcí ohřevu, proto buďte opatrní, pokud máte sníženou citlivost na teplo.
- Pokud se při používání objeví nepříjemné pocity, okamžitě přestaňte produkt používat.
- Tento produkt sami nerozebírejte.
- Nepokoušejte se baterii vyměnit sami.
- Pokud máte poranění krku, před použitím tohoto produktu se poradte s lékařem.
- Zařízení má vyhřívanou plochu, proto by při jeho používání měli být opatrní lidé, kteří špatně snášejí teplo.
- Používejte v běžných provozních podmínkách: Teplota: 0 °C až 40 °C; relativní
- Vlhkost: <80 % vlhkosti, bez kondenzace; atmosférický tlak: 50 kPa až 106 kPa. Zvolte prosím běžné přepravní a skladovací podmínky: Teplotní rozsah: -20 °C až +55 °C; Rozsah relativní vlhkosti: ≤95 % relativní vlhkosti, bez kondenzace; atmosférický tlak: 50 kPa až 106 kPa.
- Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Za žádných okolností zařízení nerozebírejte, neupravujte, neponořujte do vody ani nevystavujte otevřenému ohni, protože by mohlo dojít k poškození nebo výbuchu.

- Při používání netlačte na srdce, protože by to mohlo způsobit úraz nebo fyzické nepohodlí.
- Tento produkt nepoužívejte společně s lékařskými přístroji ani současně s více než dvěma kusy tohoto produktu, protože by to mohlo vyvolat nevolnost nebo fyzické potíže.
- Nepoužívejte k jiným účelům, než jaké jsou uvedeny v návodu k použití, protože by mohlo dojít k úrazu.
- Tento produkt nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte sami, protože by to mohlo vést k poruše nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte k masáži jiných částí těla než krku.
- Pokud pacient používá současně vysokofrekvenční chirurgické přístroje a tento masážní přístroj, může dojít k popáleninám v místě elektrod masážního přístroje a také k poškození tohoto přístroje.
- Pokud se tento produkt používá v blízkosti zařízení pro krátkovlnnou nebo mikrovlnnou terapii (ve vzdálenosti do 1 metru), může být výkon tohoto masážního přístroje nestabilní.
- Během masáže by se elektrodové podložky neměly dotýkat ran a jizev.
- Během masáže nesmí být elektrodové podložky umístěny v blízkosti oblasti srdce na hrudníku, protože by to mohlo zvýšit riziko srdeční fibrilace.

V následujících situacích se před použitím poradte s lékařem, jinak může dojít k úrazu nebo nepříjemným pocitům:

- Pacienti, kteří jsou v současné době v lékařské péči a trpí neobvyklými tělesnými příznaky.
- Pacienti s infekčními onemocněními.
- Pacienti s alergií na elektrody z nerezové oceli.
- Pacienti s poruchami srdce nebo mozkových nervů.
- Pacienti se smyslovým postižením nebo kožními abnormalitami.
- Pacienti s tělesnou teplotou nad 38 stupňů Celsia (při horečce).
- Pacienti užívající léky.
- Pacienti s abnormálním krevním tlakem.
- Pacienti, kteří nejsou schopni svobodně vyjádřit svou vůli.
- Pacienti s poruchami vnímání způsobenými závažnými poruchami periferního krevního oběhu, které jsou důsledkem onemocnění, jako je například cukrovka.

V následujících situacích je použití zakázáno:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Pacienti se zhoubným nádorovým onemocněním. | Pacienti se sklonem ke krvácení. |
| • Těhotné ženy a ženy při porodu. | Uživatelé kardiostimulátorů. |
| • Pacienti s akutním hnisavým zánětem. | Péče o oči |
| • Osoby s těžkým kognitivním postižením. | Pacienti s kovovými implantáty. |
| • Lidé se spastickou paralýzou. | Osoby s poruchami srážlivosti krve. |
| • Lidé trpící nadměrným nervovým napětím. | Blízko lidského srdce. |
| • Pacienti ve fázi křečí po cévní mozkové příhodě. | |
| • Osoby s poruchami vědomí a deformitami končetin a kloubů způsobenými kontrakturami. | |



Pozor

Aby se předešlo nežádoucím účinkům a možnému poškození, nepoužívejte tento produkt společně s následujícími lékařskými elektronickými přístroji:

- Implantovaná lékařská elektronická zařízení, jako jsou kardiostimulátory.
- Zdravotnická elektronická zařízení pro udržení života, jako jsou umělá srdce a plíce.
- Lékařská elektronická zařízení, jako jsou elektrokardiografy.
- Používání je zakázáno v prostorech s nebezpečím vznícení a výbuchu, jako jsou čerpací stanice, dílny s vysokým výskytem prachu a čerpací stanice.
- Tento produkt není zdravotnickým zařízením a neslouží k diagnostice ani léčbě poruch krční páteře. Pacienti s potížemi v oblasti krku by se měli obrátit na zdravotnické odborníky, aby nedošlo ke zpoždění léčby.
- Tento produkt nepoužívejte při řízení, lezení ani při jiných nebezpečných činnostech, protože by to mohlo vést k nehodám.
- Nepoužívejte v blízkosti srdce, nad krkem, na hlavě, v oblasti úst, v genitální oblasti ani na pokožku s kožními onemocněními a vyhněte se masírování obou chodidel současně.
- Doba aplikace horkého obkladu u tohoto produktu nesmí přesáhnout 15 minut (prosím, zkontrolujte dobu aplikace), protože hrozí riziko popálení nízkými teplotami. Nepoužívejte během spánku ani v bezvědomí; uživatelé citliví na teplo by měli nastavit nižší teplotu a přísně dodržovat dobu používání.
- Tento produkt by neměly používat osoby s poruchami krevního oběhu, jako jsou cévní onemocnění mozku, záněty nebo otoky kůže na krku, hnisavé stavy či jiné potíže související s krkem, protože by mohl příznaky zhoršit.
- Tento produkt uchovávejte mimo dosah kojenců, dětí a osob, které jsou zcela nebo částečně v bezvědomí. Nenechte jim jej používat, protože by to mohlo vést k nehodám.
- Osobám starším 70 let je používání tohoto produktu zakázáno. Zvolte prosím nižší nastavení a pečlivě sledujte dobu používání, protože lidé starší 65 let mají jemnější pokožku a méně citlivá nervová zakončení.
- Intenzitu masáže zvyšujte postupně podle toho, jak vám to vyhovuje; v opačném případě by vám vyšší nastavení mohlo způsobit svalové napětí.



Poznámka

- Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.
- Pokud pocítíte fyzické potíže způsobené vadami tohoto produktu, okamžitě jej přestaňte používat. Pokud pociťujete neobvyklé pocity v těle nebo na kůži, vyhledejte lékaře a řiďte se jeho pokyny.
- Neprovádějte masáž s elektronickými zařízeními, protože by to mohlo způsobit jejich poruchu (například narušení přesnosti elektronických hodinek).
- Pokud dojde k poruše a zařízení přestane fungovat, okamžitě jej odpojte od napájení a odstraňte; v opačném případě může dojít k přehřátí nebo zkratu, což může mít za následek úraz. V případě dotazů ohledně poprodejšího servisu se obraťte na zákaznický servis.
- Nepřipojujte ani neodpojujte nabíjecí kabel mokřima rukama, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k jiným nehodám.
- Nepoužívejte během spánku, protože by mohlo dojít k poruše zařízení a k posunutí elektrodoových podložek na jiné části těla, což by mohlo způsobit nepříjemné pocity.
- Tento produkt prosím noste správně v oblasti krční páteře a umístěte jej symetricky na obou stranách, abyste předešli úrazům nebo nepříjemným pocitům.

- Při odpojování nabíjecího kabelu od zařízení držte za zástrčku, nikoli za kabel, protože tahem byste mohli způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškodit výrobek.
- Před prvním použitím nebo pokud se baterie vybitá v důsledku dlouhodobého skladování, produkt nabijte podle návodu k použití, aby bylo zajištěno jeho správné fungování.
- Je normální, že se povrch výrobku po delším používání zahřeje.
- Při provozu přístroj mírně prohněte oblast krku; nemasírujte příliš dlouho. Pokud pocítíte nepříjemné pocity, udělejte si přestávku a teprve poté pokračujte v používání.
- Při používání nebo skladování výrobek násilím neskládejte, aby nedošlo k poškození jeho součástí.
- Při skládání produktu se vyhněte kontaktu s vlasy nebo pokožkou, aby nedošlo k jejich zachycení.

Tento produkt prosím nepoužívejte ani neskladujte na následujících místech:

Na místech vystavených přímému slunečnímu záření

Na místech, kde je voda

V silných elektromagnetických polích

V blízkosti ohňostroje

V horkých a vlhkých oblastech

V prostorech s nadměrným množstvím prachu

V místech, kde dochází k vibracím a nárazům



Doporučení

- Před použitím se prosím ujistěte, že hlavní tlačítka hostitelského zařízení fungují správně.
- Pokud zařízení používáte poprvé nebo pokud se baterie vybitá v důsledku dlouhodobého skladování, nabijte jej podle návodu k použití, aby bylo zajištěno jeho správné fungování.
- Tento produkt prosím zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy na ochranu životního prostředí, abyste zabránili znečištění životního prostředí.
- Doporučeno pro osoby starší 16 let.



Upozornění:

- Pokud se při používání masážního přístroje objeví podráždění pokožky, přestaňte jej prosím používat a počkejte dva až tři dny, zda se příznaky zmírní. Pokud příznaky přetrvávají nebo se zhoršují, vyhledejte lékaře.

- Pokud trpíte ekzémem, alergiemi nebo astmatem, může u vás při používání masážního přístroje častěji docházet k podráždění kůže nebo alergické reakci.

* Přístroj smí být napájen pouze bezpečnostním velmi nízkým napětím, které odpovídá označení na přístroji.

* Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo výuka ohledně bezpečného používání spotřebiče a pokud chápou s tím spojená rizika.

* Děti si s tímto spotřebičem nesmí hrát.

* Čištění a údržbu smí provádět děti výhradně pod dohledem dospělé osoby. Toto zařízení splňuje požadavky části 15 předpisů FCC. Provoz tohoto zařízení je podmíněn tím, že (1) toto

zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí snášet veškeré přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby zajistily přiměřenou ochranu před rušením v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení.

Pokud toto zařízení způsobuje rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit jeho vypnutím a opětovným zapnutím, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
 - Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
 - Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než je ten, ke kterému je připojen přijímač.
 - Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika specializovaného na rádia a televizory.
- Bylo ověřeno, že zařízení splňuje obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Zařízení lze bez omezení používat v přenosném režimu.

RSS-Gen, číslo 4, prosinec 2014“ a „CNR-Gen, 4. prosince 2014:

- Čeština:

Toto zařízení splňuje požadavky normy RSS pro zařízení osvobozená od licence, stanovené kanadským ministerstvem průmyslu. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí snášet jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

- Francouzština:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectriquesubi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



Toto zařízení bylo testováno pro běžné nošení na těle. Aby byly splněny požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření, je nutné dodržovat minimální vzdálenost 0 cm mezi tělem uživatele a sluchátkem, včetně antény.

Příslušenství třetích stran, jako jsou spony na opasek, pouzdra a podobné doplňky používané s tímto zařízením, by nemělo obsahovat žádné kovové součásti. Příslušenství nosené na těle, které tyto požadavky nesplňuje, nemusí vyhovovat požadavkům na vystavení vysokofrekvenčnímu záření a nemělo by se používat. Používejte pouze dodanou anténu nebo anténu schválenou výrobcem. Toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Byly provedeny všechny nezbytné testy rádiového systému.

1. UPOZORNĚNÍ: PŘI VÝMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE PODLE POKYŇŮ.

2. Zařízení splňuje specifikace pro vysokofrekvenční záření při použití ve vzdálenosti 0 mm od těla. Prohlášení o shodě s předpisy EU:

SKG Health technology Co.,Ltd. Tímto prohlašujeme, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Kopie prohlášení o shodě EU je k dispozici online na adrese <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.



Staré elektrospotřebiče se nesmějí vyhazovat společně s běžným odpadem, ale je třeba je likvidovat odděleně. Odevzdání odpadu na sběrném místě komunálního odpadu je pro soukromé osoby zdarma. Majitel starých spotřebičů je povinen tyto spotřebiče odevzdat v těchto sběrných místech nebo na podobných sběrných místech. Tímto malým osobním úsilím přispíváte k recyklaci cenných surovin a k likvidaci toxických látek.



FR

Cet appareil
et sa batterie
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

DÉPLIANT
+ BARQUETTE
+ ÉTUI



EU

REP

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3,
Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

successservice2@hotmail.com

OST_EU_20230214000009

SKG Health Technologies Co., Ltd.

Adresa: 23A Floor, Building 3, Zhongke R&D Park, No. 009, Gaoxin
South 1st Road, High-tech Zone Community, Yuehai Street,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, Čína.



Vyrobeno v Číně