


SKG Očný masážny prístroj ES500

SKG

Eye Massager  
ES500

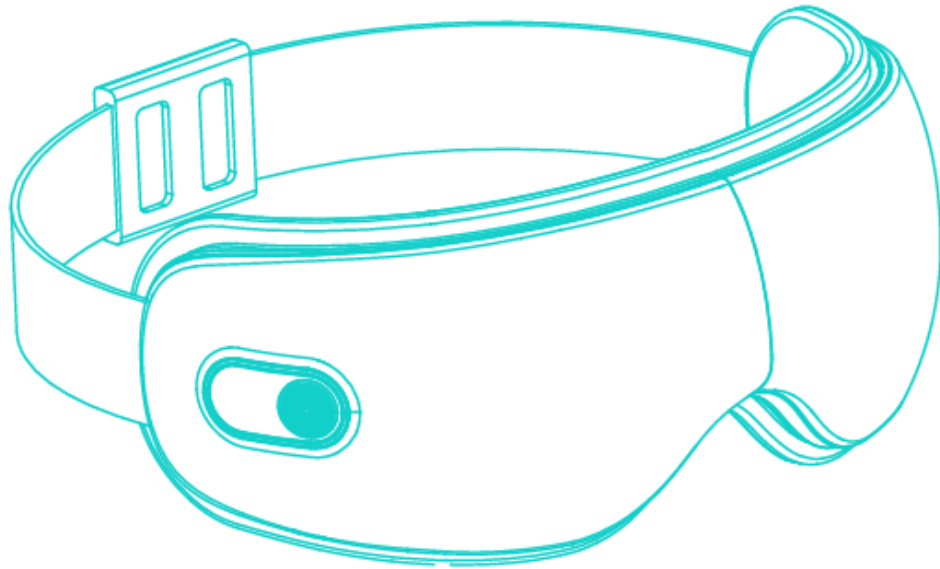

## 1. Základné informácie

Model: ES500 (SKG ES501/502)

Napätie: 5 V | Príkion: 5 W | Kapacita batérie: 1500 mAh / 5,55 Wh

Funkcie: vzduchová kompresia, teplý obklad, prehrávanie hudby cez Bluetooth

Doba prevádzky: cca 15 minút na cyklus (automatické vypnutie)

Materiál: kombinácia plastu, vnútorná mäkká podšívka

## 2. Ovládanie

1. Zapnutie/vypnutie: Podržte tlačidlo napájania 2 sekundy.
2. Prepínanie režimov: Krátke stlačenie tlačidla napájania (Vitality, Soothing, Sleep).
3. Nastavenie ohrevu: Dvojité stlačenie tlačidla napájania (Low/Medium/High/Off).
4. Hudba: Krátke stlačenie pre prepnutie skladby, dlhé stlačenie pre vypnutie/zapnutie.
5. Bluetooth: Prvé spárovanie – vyhľadajte „SKG ES501/502“. Ďalšie pripojenie prebieha automaticky.
6. Nabíjanie: Počas nabíjania svieti červená kontrolka, po úplnom nabití zelená. Prístroj nie je možné používať počas nabíjania.

## 3. Režimy

- Vitality: 100 % kompresia + ohrievanie + hudba
- Soothing: 80 % kompresia + ohrievanie + hudba
- Sleep: iba ohrievanie + hudba

## 4. Údržba

- Čistite mäkkou handričkou navlhčenou vodou.
- Nepoužívajte alkohol ani iné chemikálie.
- Neskladujte na vlhkom mieste, chráňte pred teplom.
- Pri dlhodobom nepoužívaní zakryte, aby sa nezaprášilo.
- Max. 2× denne, max. 30 minút na jedno použitie.

## 5. Bezpečnostné pokyny

- Prístroj nie je určený pre deti mladšie ako 8 rokov, tehotné ženy, osoby s ochorením očí (napr. glaukóm, šedý zákal, odlúčenie sietnice, zápal spojiviek), osoby po mozgovej príhode, s vysokým/nízkym krvným tlakom alebo so srdcovým ochorením.
- Nepoužívajte pri nosení kontaktných šošoviek, kovových sponiek, retiazok alebo iných šperkov.
- Nepoužívajte po požití alkoholu alebo iných látok ovplyvňujúcich vnímanie.
- Nie je vodotesný – neponárajte do vody, nepoužívajte v kúpeľni ani v inom vlhkom prostredí.
- Prístroj má funkciu ohrevu – osoby citlivé na teplo alebo s kožnými ochoreniami by ho mali používať len po konzultácii s lekárom.
- Ak pocítite nepohodlie, bolesť, závraty alebo podráždenie pokožky, ihneď prestaňte zariadenie používať.
- Nepoužívajte na iných častiach tela ako na očiach.

- Nevystavujte priamemu slnku, vysokým teplotám ani zdrojom ohňa.
- Nemaniipulujte s vnútornými časťami – hrozí úraz elektrickým prúdom.
- Prístroj nie je zdravotnícky prostriedok, nenahrádza liečbu ani lieky.

## **6. Likvidácia batérie**

- Pred likvidáciou prístroja vyberte batériu podľa návodu.
- Nevhadzujte do ohňa, nespojujte póly kovom.
- Odovzdajte ju do zberného miesta na recykláciu.
- V prípade úniku elektrolytu sa vyhnite kontaktu s pokožkou a očami – v prípade kontaktu ihneď opláchnite vodou a vyhľadajte lekára.

## **7. Riešenie problémov**

- Slabá kompresia / automatické vypínanie: Nabite batériu.
- Nedá sa nabiť: Skontrolujte kábel a konektor.
- Prístroj vydáva zvuk: Ide o bežný zvuk čerpadla alebo kompresie – nie je to porucha.