


SKG Oční masážní přístroj E7-EN

SKG

Eye Massager
E7-EN

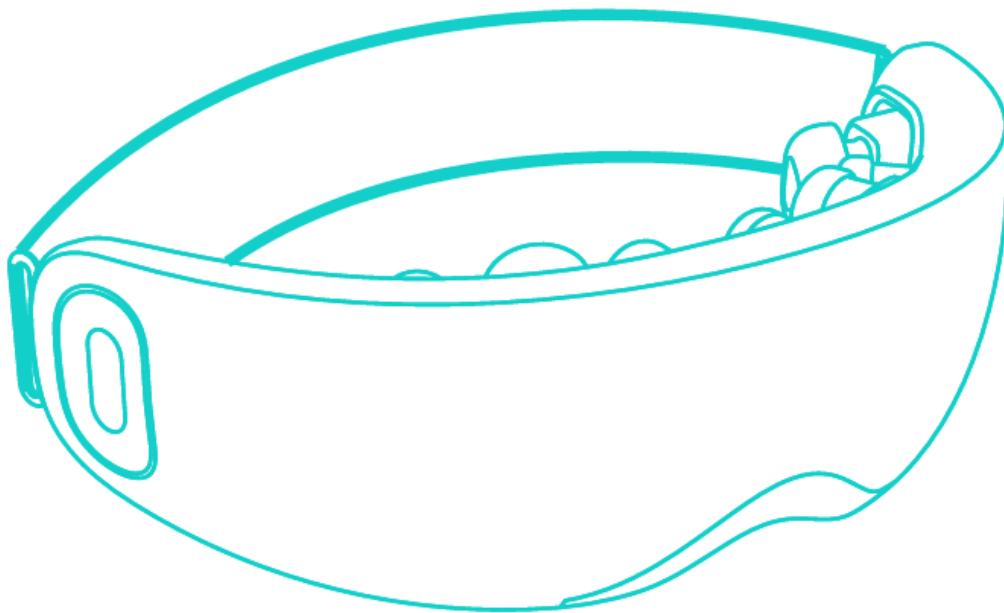

Bezpečností upozornění

- Používejte pouze na čistou pokožku a výhradně v oblasti očí.
- Nevhodné pro: osoby po mrtvici, s glaukomem, šedým zákalem, odchlípením sítnice, očními záněty, srdečními chorobami, těhotné a děti.
- Nepoužívejte po požití alkoholu.
- Nepoužívejte v horkém či vlhkém prostředí, ani při nošení kontaktních čoček, sponek či šperků.
- Přístroj není vodotěsný – neomývat pod vodou.
- V případě podráždění okamžitě přestat používat.

Baterie

- Obsahuje lithium-iontovou baterii – nevhazujte do ohně, nerozebírejte.
- Nabíjejte pouze přiloženým USB-C kabelem a nabíječkou 5 V / 1 A.
- Při likvidaci odevzdejte baterii do sběrného místa.

Použití

1. Nastavte elastický pásek a nasad'te přístroj na oči.
2. Zapnutí: Podržte tlačítko napájení 2 sekundy.
3. Přepínání režimů: Krátkým stiskem tlačítka napájení
(4 režimy: vibrace, uklidnění, spánek, cvičení očí).
4. Automatické vypnutí po 15 min.
5. Bluetooth párování: Vyhledejte „S1511HB“ a připojte se.

Údržba

- Čistěte měkkým hadříkem navlhčeným vodou.
- Nepoužívejte alkohol ani jiné chemikálie.
- Skladujte v suchu, při teplotě 0–40 °C.
- Nepoužívejte více než 2× denně, max. 30 min.

Prohlášení

Toto zařízení bylo testováno pro běžné nošení na těle. Aby byly splněny požadavky na vystavení RF záření, musí být mezi tělem uživatele a sluchátkem, včetně antény, dodržena minimální vzdálenost 0 cm. Přezky na opasek, pouzdra a podobné příslušenství jiných výrobců používané s tímto zařízením, nesmí obsahovat žádné kovové součásti. Příslušenství nošené na těle, které nesplňují tyto požadavky, nemusí splňovat požadavky na vystavení RF záření a nemělo by se používat. Používejte pouze dodanou nebo schválenou anténu anténu. Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Byly provedeny všechny základní sady rádiových testů proveden.