


SKG Oční masážní přístroj ES500

SKG

Eye Massager  
ES500

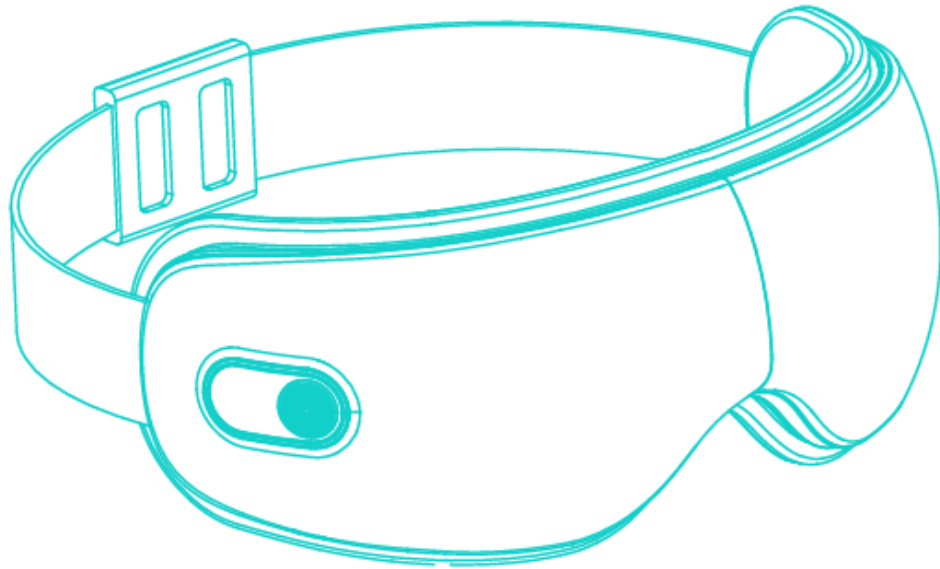

## 1. Základní informace

Model: ES500 (SKG ES501/502)

Napětí: 5V | Příkon: 5W | Kapacita baterie: 1500 mAh / 5,55 Wh

Funkce: vzduchová komprese, horký obklad, Bluetooth přehrávání hudby

Doba provozu: cca 15 minut na cyklus (automatické vypnutí)

Materiál: kombinace plastu, vnitřní měkká podšívka

## 2. Ovládání

1. Zapnutí/vypnutí: Podržte tlačítko napájení 2 sekundy.
2. Přepínání režimů: Krátké stisknutí tlačítka napájení (Vitality, Soothing, Sleep).
3. Nastavení ohřevu: Dvojité klepnutí na tlačítko napájení (Low/Medium/High/Off).
4. Hudba: Krátký stisk pro přepnutí skladby, dlouhý stisk pro vypnutí/zapnutí.
5. Bluetooth: První párování – vyhledejte „SKG ES501/502“. Další připojení probíhá automaticky.
6. Nabíjení: Při nabíjení svítí červeně, po plném nabití zeleně. Přístroj nelze používat při nabíjení.

## 3. Režimy

- Vitality: 100% komprese + ohřev + hudba
- Soothing: 80% komprese + ohřev + hudba
- Sleep: pouze ohřev + hudba

## 4. Údržba

- Čistěte měkkým hadříkem navlhčeným vodou.
- Nepoužívejte alkohol ani jiné chemikálie.
- Neskladujte ve vlhku, chraňte před teplem.
- Při dlouhodobém nepoužívání přikryjte, aby se nezanášel prachem.
- Max. 2× denně, max. 30 min na jedno použití.

## 5. Bezpečnostní pokyny

- Přístroj není určen pro děti mladší 8 let, těhotné ženy, osoby s očními onemocněními (např. glaukom, šedý zákal, odchlípení sítnice, zánět spojivek), osoby po mrtvici, s vysokým/nízkým krevním tlakem nebo s onemocněním srdce.
- Nepoužívejte při nošení kontaktních čoček, kovových sponek, řetízků či jiných šperků.
- Nepoužívejte po požití alkoholu nebo jiných látek ovlivňujících vnímání.
- Není vodotěsný – neponořovat do vody, nepoužívat v koupelně nebo jiném vlhkém prostředí.
- Přístroj má funkci ohřevu – osoby s citlivostí na teplo nebo s kožními onemocněními by měly používat pouze po konzultaci s lékařem.
- Při pocitu nepohodlí, bolesti, závratí nebo podráždění pokožky ihned přestaňte používat.
- Nepoužívejte na jiných částech těla než na očích.
- Nevystavujte přímému slunci, vysokým teplotám ani zdrojům ohně.

- Nemanipulujte s vnitřními částmi – hrozí úraz elektrickým proudem.
- Přístroj není zdravotnický prostředek, nenahrazuje léčbu ani léky.

## **6. Likvidace baterie**

- Před likvidací přístroje vyjměte baterii dle návodu.
- Nevhazujte do ohně, nepřipojujte póly kovem.
- Odevzdejte do sběrného místa pro recyklaci.
- Při úniku elektrolytu se vyhněte kontaktu s pokožkou a očima – v případě zasažení ihned opláchněte vodou a vyhledejte lékaře.

## **7. Řešení problémů**

- Slabá komprese / automatické vypínání: Nabijte baterii.
- Nelze nabíjet: Zkontrolujte kabel a konektor.
- Přístroj vydává zvuk: Jedná se o běžný zvuk pumpy nebo komprese – není závadou.