


Masážní přístroj na krk a ramena H5 Mini

SKG

Neck & Shoulder Massager  
H5Mini

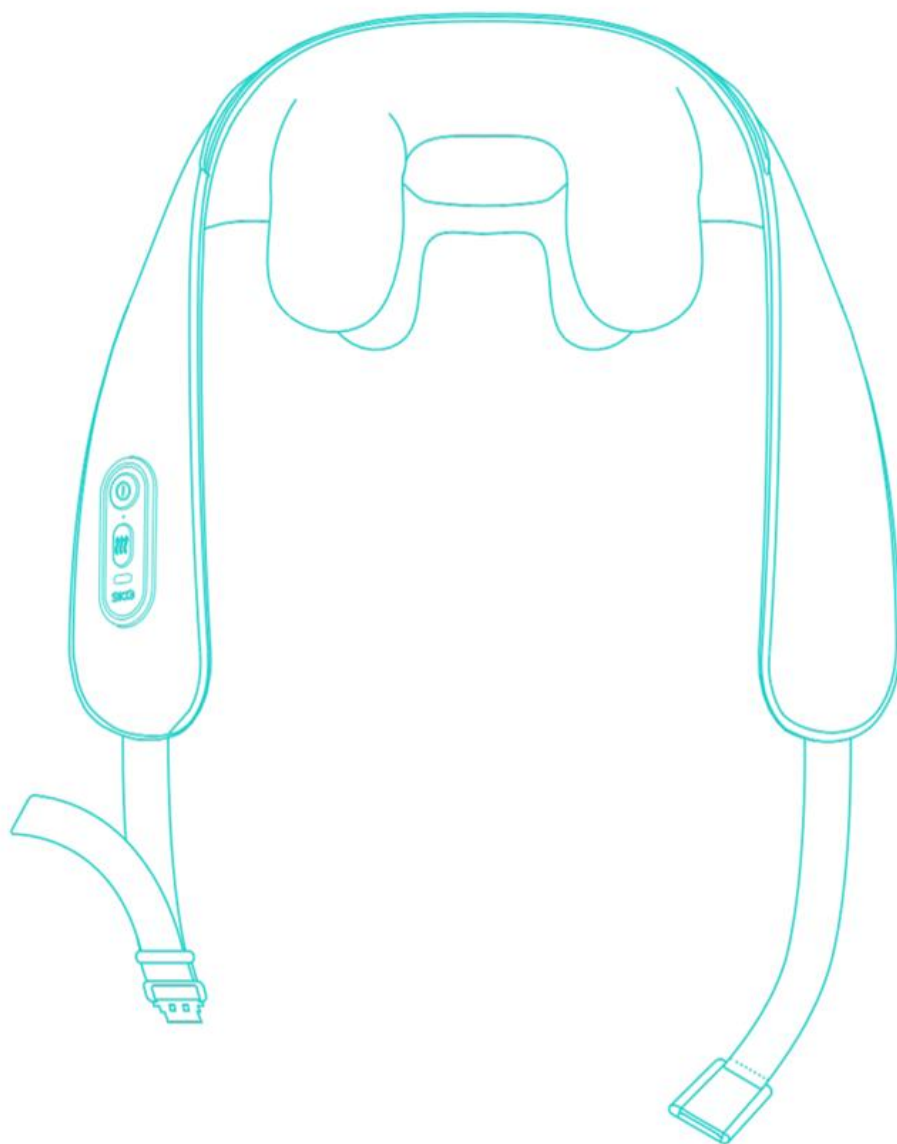

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte s implantovanými lékařskými zařízeními (kardiostimulátor, přístroje pro umělé dýchání, EKG).
- Nevhodné pro těhotné a kojící ženy, děti, osoby nad 70 let (nad 65 let pouze na nízké nastavení), osoby se závažnými zdravotními problémy (nádory, záněty, poruchy srážlivosti, kovové implantáty).
- Nepoužívejte v blízkosti srdce, na kovové implantáty, na poškozenou kůži ani v oblastech se zánětem, otokem či infekcí.
- Nepoužívejte při řízení, lezení ani jiných nebezpečných činnostech.
- Vyhněte se použití v hořlavém nebo výbušném prostředí.
- Nepoužívejte během spánku nebo ve stavu sníženého vědomí.
- Maximální doba použití: 20 minut (2 cykly) pro prevenci přehřátí a podráždění.

## POKYNY K POUŽITÍ

1. Umístěte přístroj kolem krku dle návodu a zapněte dlouhým stiskem tlačítka.
2. Krátkým stiskem přepínejte režimy, intenzitu zvyšujte postupně.
3. Horký obklad používejte max. 15 minut, vždy kontrolujte teplotu.
4. Při nepříjemných pocitech okamžitě přerušete používání.

## POKYNY PRO BATERII

- Přístroj obsahuje Li-ion baterii, kterou před likvidací vyjměte a odevzdejte k recyklaci.
- Nevystavujte baterii teplu, ohni, nárazům ani vlhkosti.
- Nepropichujte, nerozebírejte a nezkratujte póly baterie.
- Uchovávejte mimo dosah dětí; při úniku elektrolytu vyhledejte lékaře.

## ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Čistěte měkkým, mírně vlhkým hadříkem.
- Skladujte v suchu, mimo dosah přímého slunce, vlhkosti, prachu a zdrojů tepla.
- Neponechávejte v prostředí s extrémními teplotami ani v blízkosti otevřeného ohně.

- Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu, nabijte ho alespoň jednou měsíčně.

### **ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**

- Nespouští se → zkontrolujte nabití a správné zapnutí.
- Nenabíjí se → ověřte kabel USB-C, zásuvku a správné zapojení.

### **DOPORUČENÍ**

- Používejte pouze podle návodu a k určenému účelu.
- Nepoužívejte současně s jinými zdravotnickými přístroji.
- Před prvním použitím nebo po dlouhém skladování přístroj plně nabijte.