


**Oblasť s červeným svetlom**

**Masážne hlavice**  
(pulzácia + ohrev + vibrácie)

\* Obrázky a schémy uvedené v tomto návode slúžia iba na ilustračné účely. Skutočný vzhľad sa môže líšiť.

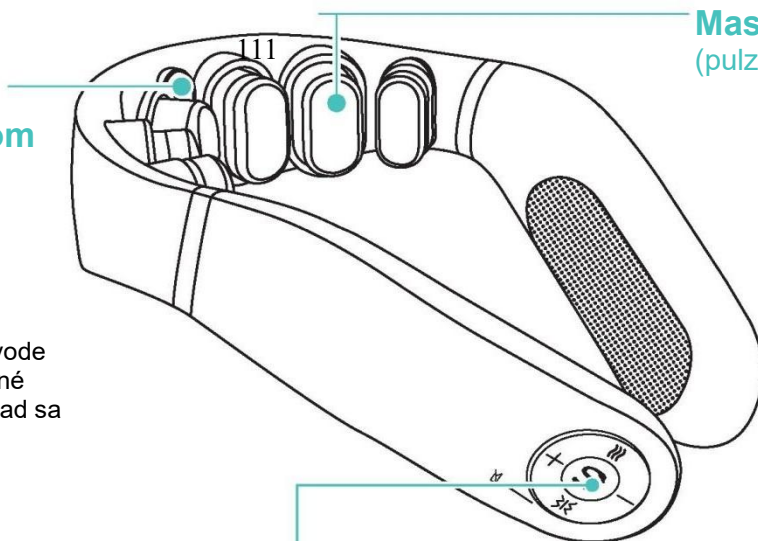

**Teplý obklad**

**Krátke stlačenie**

Zmeňte nastavenie teploty

**Zvýšenie**

**frekvencie Kontrolka**


**Zapnuté/Vypnuté/Režim**

**Zníženie frekvencie**

**Prepínač vibrácií / tichého režimu**

**Krátke stlačenie** Prepínač úrovne vibrácií


**Dlhé stlačenie** Zapnutie/vypnutie hlasu

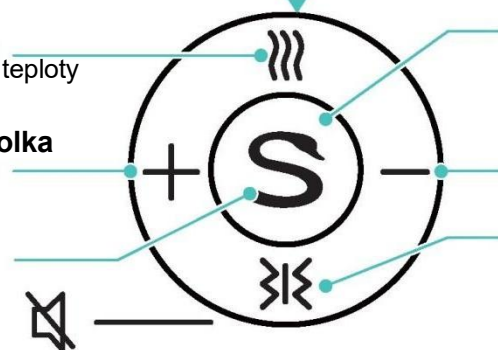

## Pokyny na nosenie


\* Noste tesne pri tele

\* Pred použitím navlhčite pokožku vlhčenou utierkou

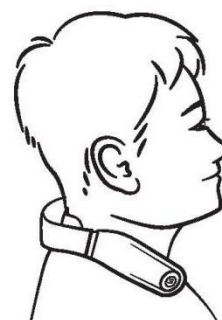

## Aplikácia Future Wear

1. Stiahnite si aplikáciu „Future Wear“ z obchodu s aplikáciami alebo naskenujte QR kód.

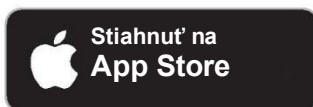

Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.  
Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.



2. Zaregistrujte sa a prihláste sa do aplikácie.



3. Zapnite zariadenie a aktivujte Bluetooth v mobilnom telefóne, potom zariadenie pridajte do aplikácie „Future Wear“.

Pokyny na nastavenie intenzity pulzov: Výchozie nastavenie produktu je štandardná intenzita masáže, ktorá vyhovuje potrebám väčšiny používateľov. Ak uprednostňujete intenzívnejšiu pulznú masáž, môžete ju nastaviť na „Silnú intenzitu masáže“ kliknutím na ikonu „...“ v pravom hornom rohu stránky na ovládanie zariadenia v aplikácii.

## Zobrazenie stavu batérie

SK

Farba kontrolky	Stav kontrolky	Popis
Modré svetlo	Svieti	Úroveň nabitia batérie $\geq 25\%$
Oranžové svetlo	Svieti	Úroveň nabitia batérie $< 25\%$
Oranžové svetlo	Bliká	Nabíjanie
Modré svetlo	Bliká	Batéria je úplne nabitá

## Údržba

SK

- Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu.
- Vyhnite sa vysokým teplotám a vlhkosti.
- Nevystavujte výrobok otvorenému ohňu.
- Chráňte pred tvrdými predmetmi a zabráňte nárazom a poškrabaniu.
- Produkt utrite mierne navlhčenou alebo mäkkou handričkou.
- Ak produkt dlhší čas nepoužívate, nabite ho raz za mesiac a počas používania udržiavajte batériu plne nabitú.

## Technické údaje

SK



Názov produktu	Prístroj na masáž krku		
Model	GS500-N	Menovité vstupné napätie	5 V $\equiv$
Kapacita batérie	1800 mAh/6,66 Wh	Menovitý príkon	10 W

Ak produkt nefunguje správne, skontrolujte prosím nasledujúce body. Ak naše odporúčania problém nevyriešia, vráťte prosím produkt predajcovi na opravu.

Stav	Možná príčina	Riešenie
Nedá sa spustiť	Vybitá batéria	Nabite produkt
	Produkt nie je zapnutý.	Zapnite zariadenie dlhým stlačením tlačidla napájania
	Zariadenie je stále pripojené k domácej elektrickej zásuvke	Odpojte nabíjací kábel od zariadenia.
Nedá sa nabíjať alebo nesvieti kontrolka nabíjania	Nabíjací kábel nie je správne zasunutý do zásuvky	Znovu pripojte nabíjací kábel.
	Používate nesprávny nabíjací kábel	Použite kábel s konektorom typu C.

## Likvidujte s opatrnosťou

**Prosíme, podporujte recykláciu dobíjateľných batérií (lítio-iónových batérií)**

 <p><b>Nebezpečenstvo</b></p>	<p>Batéria tohto produktu je špeciálna dobíjateľná batéria, ktorú nemožno používať v iných zariadeniach. Akonáhle batériu vyberiete, nenabíjajte ju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nevhadzujte ju do ohňa ani ju nevystavujte nadmernému teplu.</li> <li>• Neprebodávajte ju klincami, nevystavujte ju silným nárazom a nerozoberajte ju</li> <li>• Nepripájajte kladný a záporný pól batérie priamo na kovový predmet</li> <li>• Neskladujte ju spolu s náhrdelníkmi, sponkami do vlasov atď.</li> <li>• Nenabíjajte, nepoužívajte ani neskladujte na miestach s vysokými teplotami, ako je okolie sporáka alebo na priamom slnku</li> <li>• Všetky vyššie uvedené situácie môžu viesť k prehriatiu, požiaru alebo prasknutiu.</li> </ul>
 <p><b>Upozornenie</b></p>	<p>Vyberanú nabíjateľnú batériu uložte mimo dosahu malých detí, aby nedošlo k jej náhodnému prehlnutiu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.</li> <li>• Ak dôjde k úniku tekutiny z batérie, nedotýkajte sa jej holými rukami.</li> <li>• Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:</li> <li>• Ak sa tekutina z batérie dostane do očí, hrozí nebezpečenstvo oslepnutia. Nedotýkajte sa očí rukami. Okamžite ich vypláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Ak sa tekutina z batérie dostane na telo alebo na odev, môže spôsobiť zápal kože alebo poranenie. Opláchnite čistou vodou a ak</li> </ul>

	<p>nepríjemné pocity pretrvávajú, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Demontáž je povolená iba v prípade likvidácie výrobku. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom, zraneniu alebo iným nehodám. V prípade opravy (s výnimkou výmeny batérie) sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.</li></ul>
--	---

Lítium-iónová batéria použitá v tomto produkte je cenným recyklovateľným materiálom. Pred likvidáciou zariadenia vyberte lítium-iónovú batériu a odovzdajte ju odbornej organizácii, ktorá sa zaoberá recykláciou a spracovaním dobíjateľných batérií.

- Pred likvidáciou zariadenia je nutné z neho vybrať batériu.
- Pred vyberaním batérie je potrebné zariadenie vypnúť.
- Batériu je potrebné bezpečne zlikvidovať.

#### Postup demontáže:

1. Otvorte kryt pomocou nástroja.
2. Odskrutkujte skrutky na doske s plošnými spojmi.
3. Odpojte konektor batérie.
4. Vyberte batériu.

## Upozornenia a bezpečnostné pokyny

SK



### Varovanie

- Tento výrobok je určený na masáže v rámci osobnej starostlivosti a nemožno ho používať ako náhradu za lieky alebo zdravotnícke pomôcky.
- Tento produkt nesmú používať deti, tehotné ženy a ženy v období menštruácie.
- Obsahuje lítiovú batériu. Nevystavujte ho vysokým teplotám.
- Tento produkt používajte pod dohľadom lekára, ak máte citlivú pokožku, alergickú dermatitídu na tvári alebo ak máte na tvári oblasti s kozmetickými prípravkami.
- Používatelia s alergiou na kovy alebo teplo musia dodržiavať bezpečnostné opatrenia.
- Tento produkt je vybavený funkciou ohrevu, preto buďte opatrní, ak máte zníženú citlivosť na teplo.
- Ak sa pri používaní vyskytnú nepríjemné pocity, ihneď prestaňte výrobok používať.
- Tento produkt nerozoberajte.
- Nesnažte sa batériu vymeniť sami.
- Ak máte poranenie krku, pred použitím tohto výrobku sa poraďte s lekárom.
- Zariadenie má vyhrievanú plochu, preto by pri jeho používaní mali byť opatrní ľudia, ktorí zle znášajú teplo.
- Používajte za bežných prevádzkových podmienok: Teplota: 0 °C až 40 °C; relatívna
- Vlhkosť: <80 % vlhkosti, bez kondenzácie; atmosférický tlak: 50 kPa až 106 kPa. Zvoľte prosím bežné prepravné a skladovacie podmienky: Teplotný rozsah: -20 °C až +55 °C; Rozsah relatívnej vlhkosti: ≤95 % relatívnej vlhkosti, bez kondenzácie; atmosférický tlak: 50 kPa až 106 kPa.
- Tento produkt obsahuje lítiovú batériu. Za žiadnych okolností zariadenie nerozoberajte, neupravujte, neponárajte do vody ani nevystavujte otvorenému ohňu, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu alebo výbuchu.

- Pri používaní netlačte na srdce, pretože by to mohlo spôsobiť úraz alebo fyzické ťažkosti.
- Tento produkt nepoužívajte spolu s lekáskymi prístrojmi ani súčasne s viac ako dvoma kusmi tohto produktu, pretože by to mohlo vyvolať nevoľnosť alebo fyzické ťažkosti.
- Nepoužívajte na iné účely, ako sú uvedené v návode na použitie, pretože by mohlo dôjsť k úrazu.
- Tento výrobok nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte sami, pretože by to mohlo viesť k poruche alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte na masáž iných častí tela ako krku.
- Ak pacient používa súčasne vysokofrekvenčné chirurgické prístroje a tento masážny prístroj, môže dôjsť k popáleninám v mieste elektród masážneho prístroja a tiež k poškodeniu tohto prístroja.
- Ak sa tento výrobok používa v blízkosti zariadení na krátkovlnnú alebo mikrovlnnú terapiu (vo vzdialenosti do 1 metra), výkon tohto masážneho prístroja môže byť nestabilný.
- Počas masáže by sa elektródové podložky nemali dotýkať rán a jaziev.
- Počas masáže nesmú byť elektródové podložky umiestnené v blízkosti oblasti srdca na hrudníku, pretože by to mohlo zvýšiť riziko srdcovej fibrilácie.

**V nasledujúcich situáciách sa pred použitím poraďte s lekárom, inak môže dôjsť k úrazu alebo nepríjemným pocitom:**

- Pacienti, ktorí sú v súčasnosti v lekárskej starostlivosti a trpia nezvyčajnými telesnými príznakmi.
- Pacienti s infekčnými ochoreniami.
- Pacienti s alergiou na elektródy z nehrdzavejúcej ocele.
- Pacienti s poruchami srdca alebo mozgových nervov.
- Pacienti so zmyslovým postihnutím alebo kožnými abnormalitami.
- Pacienti s telesnou teplotou nad 38 stupňov Celzia (pri horúčke).
- Pacienti, ktorí užívajú lieky.
- Pacienti s abnormálnym krvným tlakom.
- Pacienti, ktorí nie sú schopní slobodne vyjadriť svoju vôľu.
- Pacienti s poruchami vnímania spôsobenými závažnými poruchami periférneho krvného obehu, ktoré sú dôsledkom ochorení, ako je napríklad cukrovka.

**V nasledujúcich situáciách je použitie zakázané:**

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| • Pacienti s malígnym nádorovým ochorením.   | Pacienti so sklonom ku krvácaniu.     |
| • Tehotné ženy a ženy pri pôrode.  | Používatelia kardiostimulátorov.      |
| • Pacienti s akútnym hnisavým zápalom.   | Starostlivosť o oči                   |
| • Osoby s ťažkým kognitívnym postihnutím.  | Pacienti s kovovými implantátmi.      |
| • Ľudia so spastickou paralýzou.   | Osoby s poruchami zrážanlivosti krvi. |
| • Ľudia trpiaci nadmerným nervovým napätím.  | V blízkosti ľudského srdca.           |
| • Pacienti vo fázi kŕčov po cievnej mozgovej príhode.                                  |                                       |
| • Osoby s poruchami vedomia a deformáciami končatín a kĺbov spôsobenými kontraktúrami. |                                       |



**Upozornenie**

**Aby sa predišlo nežiaducim účinkom a možnému poškodeniu, nepoužívajte tento produkt spolu s nasledujúcimi lekáskymi elektronickými zariadeniami:**

- Implantované lekárske elektronické zariadenia, ako sú kardiostimulátory.
- Zdravotnícke elektronické zariadenia na udržanie života, ako sú umelé srdcia a pľúca.
- Lekárske elektronické zariadenia, ako sú elektrokardiografy.
- Používanie je zakázané v priestoroch s nebezpečenstvom vznietenia a výbuchu, ako sú čerpace stanice, dielne s vysokým výskytom prachu a čerpace stanice.
- Tento produkt nie je zdravotníckym zariadením a neslúži na diagnostiku ani liečbu porúch krčnej chrbtice. Pacienti s ťažkosťami v oblasti krku by sa mali obrátiť na zdravotníckych odborníkov, aby nedošlo k oneskoreniu liečby.
- Tento produkt nepoužívajte pri šoférovaní, lezení ani pri iných nebezpečných činnostiach, pretože by to mohlo viesť k nehodám.
- Nepoužívajte v blízkosti srdca, nad krkom, na hlave, v oblasti úst, v genitálnej oblasti ani na pokožku s kožnými ochoreniami a vyhnite sa masáži oboch chodidiel súčasne.
- Doba aplikácie horúceho obkladu pri tomto produkte nesmie presiahnuť 15 minút (skontrolujte prosím dobu aplikácie), pretože hrozí riziko popálenia nízkymi teplotami. Nepoužívajte počas spánku ani v bezvedomí; používatelia citliví na teplo by mali nastaviť nižšiu teplotu a prísne dodržiavať dobu používania.
- Tento výrobok by nemali používať osoby s poruchami krvného obehu, ako sú cievne ochorenia mozgu, zápaly alebo opuchy kože na krku, hnisavé stavy alebo iné ťažkosti súvisiace s krkom, pretože by mohol príznaky zhoršiť.
- Tento produkt uchovávajte mimo dosahu dojčiat, detí a osôb, ktoré sú úplne alebo čiastočne v bezvedomí. Nedovoľte im ho používať, pretože by to mohlo viesť k úrazom.
- Osobám starším ako 70 rokov je používanie tohto produktu zakázané. Zvoľte prosím nižšie nastavenie a starostlivo sledujte dobu používania, pretože ľudia starší ako 65 rokov majú jemnejšiu pokožku a menej citlivé nervové zakončenia.
- Intenzitu masáže zvyšujte postupne podľa toho, ako vám to vyhovuje; v opačnom prípade by vám vyššie nastavenie mohlo spôsobiť svalové napätie.



### **Poznámka**

- Pred použitím tohto výrobku si prosím pozorne prečítajte návod na použitie.
- Ak pocítite fyzické ťažkosti spôsobené vadami tohto výrobku, okamžite ho prestaňte používať. Ak pocítite nezvyčajné pocity v tele alebo na koži, vyhľadajte lekára a riadte sa jeho pokynmi.
- Nevykonávajte masáž s elektronickými zariadeniami, pretože by to mohlo spôsobiť ich poruchu (napríklad narušenie presnosti elektronických hodín).
- Ak dôjde k poruche a zariadenie prestane fungovať, okamžite ho odpojte od napájania a odstráňte; v opačnom prípade môže dôjsť k prehriatiu alebo skratu, čo môže mať za následok úraz. V prípade otázok týkajúcich sa popredajného servisu sa obráťte na zákaznícky servis.
- Nepripájajte ani neodpájajte nabíjací kábel mokrými rukami, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k iným nehodám.
- Nepoužívajte počas spánku, pretože by mohlo dôjsť k poruche zariadenia a k posunutiu elektródových podložiek na iné časti tela, čo by mohlo spôsobiť nepríjemné pocity.
- Tento produkt noste správne v oblasti krčnej chrbtice a umiestnite ho symetricky na oboch stranách, aby ste predišli úrazom alebo nepríjemným pocitom.

- Pri odpojení nabíjacieho kábla od zariadenia držte za zástrčku, nie za kábel, pretože ťahaním by ste mohli spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poškodiť výrobok.
- Pred prvým použitím alebo ak je batéria vybitá v dôsledku dlhodobého skladovania, nabite produkt podľa návodu na použitie, aby bolo zabezpečené jeho správne fungovanie.
- Je normálne, že sa povrch výrobku po dlhšom používaní zahreje.
- Počas prevádzky mierne prehnite oblasť krku; nemasírujte príliš dlho. Ak pocítite nepríjemné pocity, urobte si prestávku a až potom pokračujte v používaní.
- Pri používaní alebo skladovaní výrobok násilím neskladajte, aby nedošlo k poškodeniu jeho častí.
- Pri skladovaní výrobku sa vyhnite kontaktu s vlasmi alebo pokožkou, aby nedošlo k ich zachyteniu.

**Tento výrobok prosím nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach:** Na

miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu

Na miestach, kde je voda V

silných elektromagnetických poliach

V blízkosti ohňostroja

V horúcich a vlhkých oblastiach

V priestoroch s nadmerným množstvom

prachu

V miestach, kde dochádza k vibráciám a nárazom



**Odporúčania**

- Pred použitím sa uistite, že hlavné tlačidlá hostiteľského zariadenia fungujú správne.
- Ak zariadenie používate po prvýkrát alebo ak je batéria vybitá v dôsledku dlhodobého skladovania, nabite ju podľa návodu na použitie, aby bolo zabezpečené jej správne fungovanie.
- Tento výrobok prosím zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia, aby ste zabránili znečisteniu životného prostredia.
- Odporúčané pre osoby staršie ako 16 rokov.



**Upozornenie:**

- Ak sa pri používaní masážneho prístroja objaví podráždenie pokožky, prestaňte ho prosím používať a počkajte dva až tri dni, či sa príznaky zmiernia. Ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú, vyhľadajte lekára.

- Ak trpíte ekzémom, alergiami alebo astmou, pri používaní masážneho prístroja sa u vás môže častejšie vyskytovať podráždenie kože alebo alergická reakcia.

\* Prístroj smie byť napájaný iba bezpečnostným veľmi nízkym napätím, ktoré zodpovedá označeniu na prístroji.

\* Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak im bol poskytnutý dohľad alebo inštrukcia týkajúca sa bezpečného používania spotrebiča a ak chápu s tým spojené riziká.

\* Deti sa s týmto spotrebičom nesmú hrať.

\* Čistenie a údržbu smú deti vykonávať výlučne pod dohľadom dospelšej osoby. Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 predpisov FCC. Prevádzka tohto zariadenia je podmienená tým, že (1) toto

zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí znášať všetko prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduci prevádzku.

Akkoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

**POZNÁMKA:** Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú stanovené tak, aby zabezpečili primeranú ochranu pred rušením v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Nie je však možné zaručiť, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu.

Ak toto zariadenie spôsobuje rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť jeho vypnutím a opätovným zapnutím, odporúčame používateľovi, aby sa pokúsil rušenie odstrániť pomocou jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte smer alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom okruhu, ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika špecializovaného na rádiá a televízory. Bolo overené, že zariadenie spĺňa všeobecné požiadavky na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu.

Zariadenie možno bez obmedzenia používať v prenosnom režime.

RSS-Gen, číslo 4, december 2014“ a „CNR-Gen, 4. december 2014:

- Čeština:

Toto zariadenie spĺňa požiadavky normy RSS pre zariadenia oslobodené od licencie, stanovené kanadským ministerstvom priemyslu. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí znášať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduca prevádzka zariadenia.

- Francúzština:

Toto zariadenie je v súlade s normami CNR kanadského ministerstva priemyslu platnými pre rádiové zariadenia oslobodené od licencie. Prevádzka je povolená za týchto dvoch podmienok:

(1) zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a

(2) užívateľ zariadenia musí akceptovať akékoľvek rádiové rušenie, aj keď toto rušenie môže ohroziť jeho prevádzku.



Toto zariadenie bolo testované na bežné nosenie na tele. Aby boli splnené požiadavky na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu, je potrebné dodržiavať minimálnu vzdialenosť 0 cm medzi telom používateľa a slúchadlom vrátane antény.

Príslušenstvo tretích strán, ako sú spony na opasok, puzdrá a podobné doplnky používané s týmto zariadením, by nemalo obsahovať žiadne kovové časti. Príslušenstvo nosené na tele, ktoré nespĺňa tieto požiadavky, nemusí spĺňať požiadavky na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu a nemalo by sa používať. Používajte iba dodanú anténu alebo anténu schválenú výrobcom. Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Boli vykonané všetky potrebné testy rádiového systému.

1. UPOZORNENIE: PRI VÝMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU. VYPUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.

2. Zariadenie spĺňa špecifikácie pre vysokofrekvenčné žiarenie pri použití vo vzdialenosti 0 mm od tela. Vyhlásenie o zhode s predpismi EÚ:

SKG Health technology Co.,Ltd. Týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Kópia vyhlásenia o zhode s predpismi EÚ je k dispozícii online na adrese <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.



Staré elektrické spotrebiče sa nesmú vyhadzovať spolu s bežným odpadom, ale je potrebné ich likvidovať oddelene. Odovzdanie odpadu na zbernom mieste komunálneho odpadu je pre súkromné osoby bezplatné. Majiteľ starých spotrebičov je povinný tieto

spotrebiče odovzdať v týchto zberných miestach alebo v podobných zberných miestach. Týmto malým osobným úsilím prispievate k recyklácii cenných surovín a k likvidácii toxických látok.



FR

Tento prístroj  
a jeho batéria  
sa recyklujú

ODOVZDAŤ  
V OBCHODE



ODOVZDAŤ NA  
ZBERNOM  
MIESTE




Zberné miesta na stránke [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Uprednostnite opravu alebo darovanie vášho zariadenia!



FR

LETÁK,  
ŠKATULKA,  
OBAL

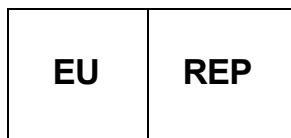

**SUCCESS COURIER SL**

CALLE RIO TORMES Č. 1, POSCHODIE 1, PRAVÁ STRANA, KANCELÁRIA 3,  
Fuenlabrada, Madrid, 28947 Španielsko

[successservice2@hotmail.com](mailto:successservice2@hotmail.com)

OST\_EU\_20230214000009

---

**SKG Health Technologies Co., Ltd.**

Adresa: 23A Floor, Building 3, Zhongke R&D Park, No. 009, Gaoxin South  
1st Road, High-tech Zone Community, Yuehai Street, Nanshan District,  
Shenzhen, Guangdong, Čína.



**Vyrobené v Číne**