


## Masážní přístroj na pas VS500

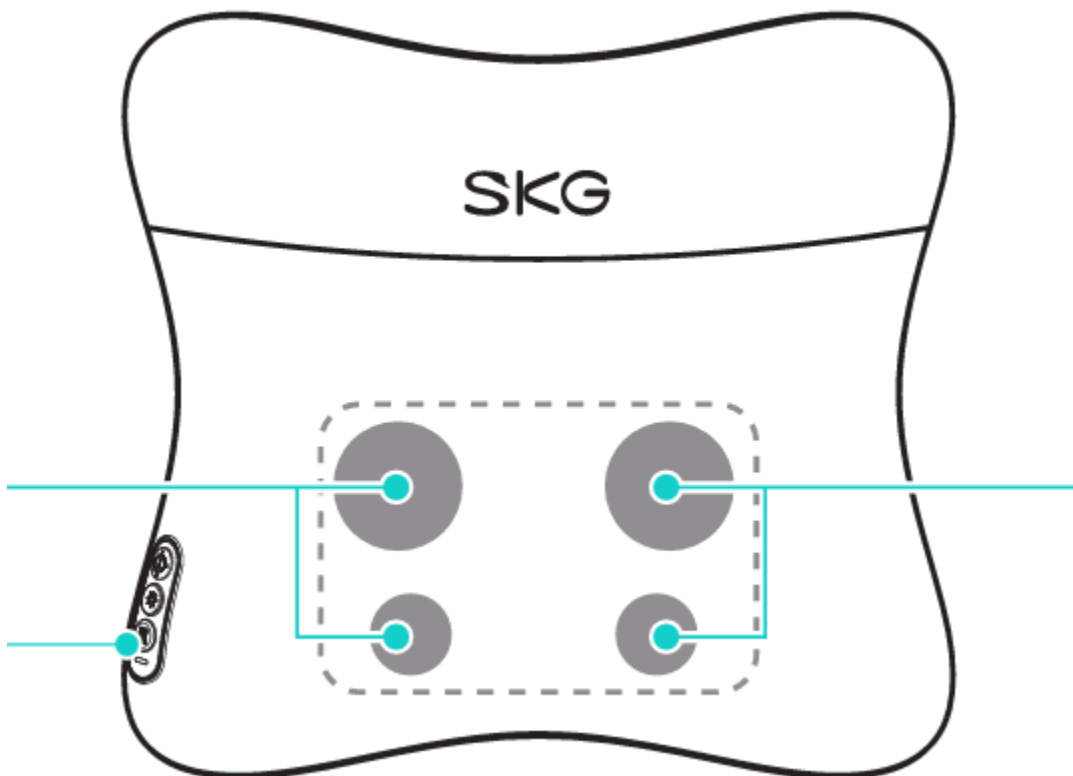

### 1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY

- Model: VS500
- Kapacita baterie: 3200 mAh / 23,68 Wh
- Vstup: 5 V, max. 15 W
- Funkce: masáž, horký obklad (přední a zadní strana)
- Nabíjení: USB-C

### 2. OVLÁDÁNÍ

- Zapnutí/Vypnutí: Podržte tlačítko napájení 3 s.
- Změna režimu masáže: Krátce stiskněte tlačítko napájení.
- Horký obklad přední strana: Krátce stiskněte tlačítko „Hot Compress“ vpředu.
- Horký obklad zadní strana: Krátce stiskněte tlačítko vzadu, dalším stiskem měníte intenzitu, třetím stiskem vypnete.
- Ukončení masáže: Podržte tlačítko napájení 3 s.

### 3. INDIKACE STAVU

- Zelené světlo: baterie plně nabitá.
- Oranžové blikání: baterie téměř vybitá.
- Oranžové „dýchající“ světlo: nabíjení.
- Zelené „dýchající“ světlo: nabito.

### 4. NABÍJENÍ

- Používejte pouze nabíječky do 15 W.
- Nenabíjejte mokřýma rukama.
- Pokud nepoužíváte delší dobu, nabijte alespoň 1× měsíčně na >20 % kapacity.

### 5. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívat:

- S kardiostimulátorem, umělým srdcem/plícemi, EKG přístrojem.
- V těhotenství nebo po porodu bez souhlasu lékaře.
- Na rány, jizvy, místa s nádory, kovovými implantáty, záněty.
- U osob s poruchami srážlivosti, po mrtvici ve spastické fázi, s těžkými kognitivními poruchami, kojenců a dětí bez vědomí.

Konzultovat s lékařem:

- Horečka >38 °C, infekce, vysoký/nízký tlak, srdeční či neurologické problémy, osteoporóza, zlomeniny páteře.

Při nepohodlí ihned přestaňte používat.

### 6. ÚDRŽBA A LIKVIDACE

- Baterii recyklujte u specializované firmy.
- Před vyjmutím baterie přístroj vypněte.
- Postup: otevřít zip, povolit šrouby, odpojit vodiče, vyjmout jednotku a baterii.
- Nepřehřívat, nepropichovat, nerozebírat baterii.
- Uchovávat mimo dosah dětí.

### 7. DOPLŇKOVÉ INFORMACE

- Pro osoby starší 16 let.
- Splňuje směrnici (EU) 2023/988.
- Výrobce: SKG Health Technology Co., Ltd.