


SKG Masážní přístroj na krk a ramena HS500-2

SKG

Neck & Shoulder Massager
HS500-2

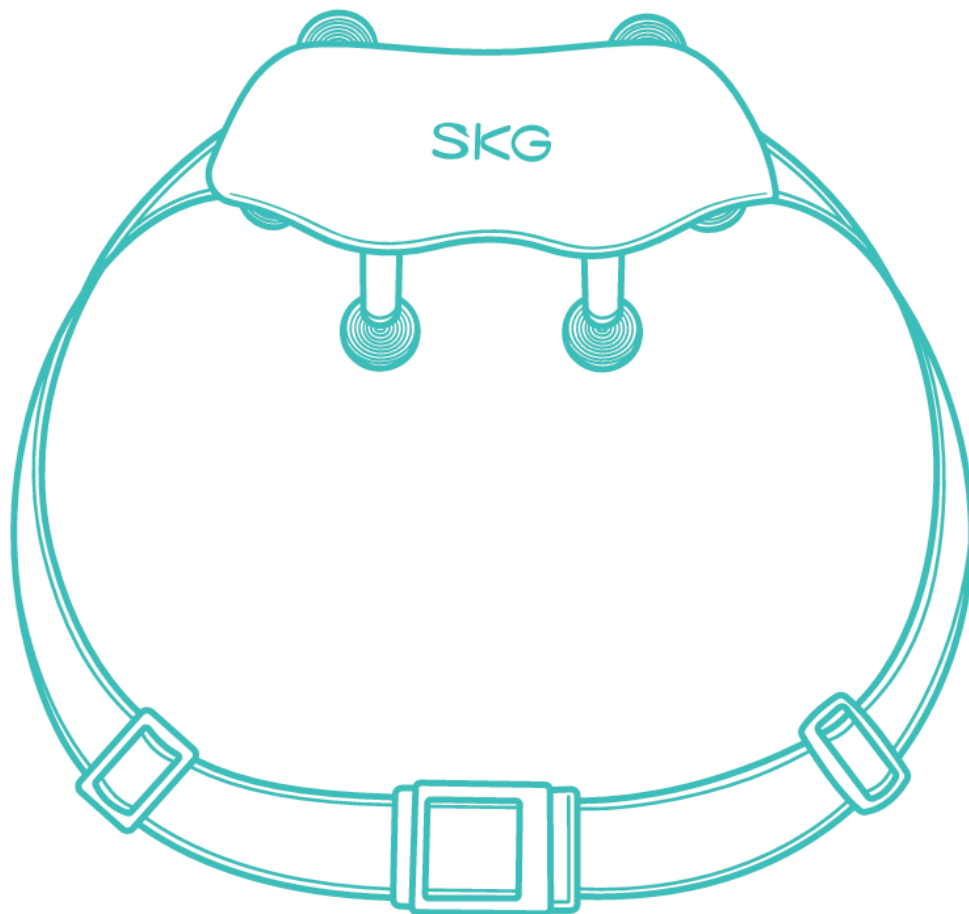

USER MANUAL

Bezpečnostní upozornění

- Používejte pouze dle určení na oblast krku a ramen.
- Nevhodné pro osoby s kardiostimulátorem nebo závažnými zdravotními problémy.
- Nepoužívejte při řízení ani během spánku.
- Nepoužívejte na poraněnou nebo oteklou pokožku.
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí ani ve vodě.
- V případě bolesti nebo nepříjemných pocitů přestaňte používat.

Baterie

- Obsahuje dobíjecí lithium-iontovou baterii.
- Nabíjejte pomocí USB kabelu (5 V).
- Nevystavujte vysokým teplotám ani ohni.
- Baterii nerozebírejte ani nepoškozujte.
- Likvidujte ekologicky ve sběrném místě.

Použití

- Nasad'te přístroj kolem krku a nastavte popruhy.
- Zapnutí/vypnutí: podržte tlačítko.
- Přepínání režimů: krátkým stiskem tlačítka.
- Pro intenzivnější masáž použijte ruční zatažení za popruhy.
- Po použití přístroj vypněte a sundejte.

Režimy

- Masážní hlavice s rotací
- Vyhřívání (hot compress)
- Více úrovní intenzity masáže

Údržba

- Čistěte měkkým, lehce navlhčeným hadříkem.
- Nepoužívejte chemické čisticí prostředky.
- Neponořujte do vody.
- Skladujte na suchém místě.
- Doporučené použití: max. 30 minut denně.

Prohlášení

- Zařízení splňuje příslušné evropské normy a směrnice.
- Určeno pro běžné použití na těle.